

Removal TOOL

Retainer / Aligner

Strumento per rimuovere allineatori dal cavo orale in modo facile e sicuro.

Confezione assortita da 10 pezzi.




Design ad uncino

Design con testa arrotondata e smussata per prevenire lesioni orali.

Design ergonomico


Grazie alla sua forma è di facile utilizzo e leggero e comodo da trasportare.

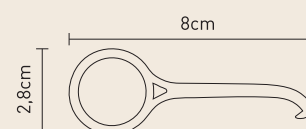

Anello antiscivolo


Impugnatura circolare per una presa comoda e per una rimozione efficace e intuitiva.

EPT200 Strumento per rimuovere allineatori

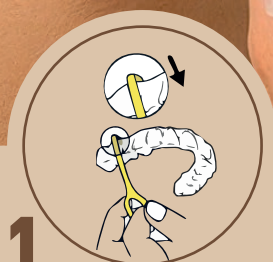


1

Inserire il dito nell'anello e posizionare il gancio tra allineatore e dente.

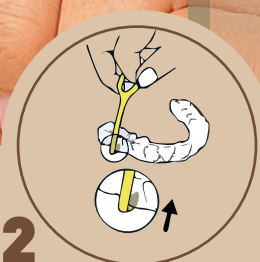


2

Tirare l'allineatore lentamente verso il basso, esercitando una leggera forza.

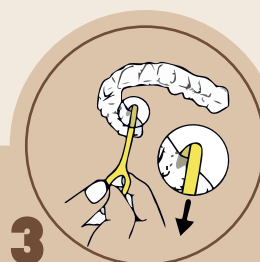

3

Dopo aver rimosso una con estremità, procedere con l'altra.

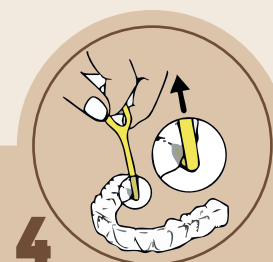

4

Ripeti l'operazione sul lato opposto.