

Endo Gutta Perfect

Punte di guttaperca

Descrizione

Le punte di guttaperca sono utilizzate per riempire il canale radicolare di un dente dopo la pulizia e la sagomatura.

Indicazioni d'uso

- Selezionare la punta di guttaperca che meglio corrisponde all'ultimo strumento utilizzato per sagomare il canale.
- Inserire lentamente la guttaperca fino alla lunghezza di lavoro finale.
- Inserire nel canale con accessori accanto alla punta di guttaperca master.
- Riscaldare la guttaperca e compattare verticalmente come desiderato.
- Chiudere il canale con materiale da restauro e completare il restauro.

Precauzioni

- Prodotto per solo uso dentale.
- Prodotto non riutilizzabile.
- Prodotto non sterile.
- Non utilizzare l'autoclave o sterilizzare a caldo.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- Seguire attentamente le condizioni di conservazione raccomandate. In caso contrario, la guttaperca si indurrà prematuramente con conseguenti ritardi procedurali o richiederà un nuovo trattamento per la rimozione.
- Non pulire o sterilizzare la guttaperca, ciò potrebbe rendere inutilizzabile il dispositivo.

Avvertenze

- Non applicare una forza eccessiva durante la condensazione laterale al fine di evitare la frattura verticale della radice.
- Garantire un'adeguata preparazione del sito rimuovendo tessuto/osso/dentina infetti al fine di prevenire infezioni.
- Seguire le corrette tecniche di obturazione per evitare incidenti procedurali che potrebbero portare a una persistente infezione da parodontite apicale.
- Non utilizzare punte di guttaperca piegate o distorte.
- Se si utilizza una fonte di calore, controllare la temperatura per garantire che la guttaperca si scioglia. Un'impostazione errata della temperatura può causare ritardi procedurali o ri-

chiedere un nuovo trattamento.

- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

La sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica è consultabile presso EUDAMED e finché tale piattaforma non risulti completamente operativa può essere richiesta alla Dental World inviando una mail a info@dental-world.it (UDI-DI di base: 8050996CONIGUTTAT7)

Controindicazioni

Pazienti sensibili al lattice potrebbero avere una reazione allergica alla guttaperca.

Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente.
- Conservare correttamente nella propria confezione.
- Non disperdere nell'ambiente.

Simboli



Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'incapacità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Endo Gutta Perfect

Gutta percha points

Description

Gutta-percha tips are used to fill the root canal of a tooth after cleaning and shaping.

Indications for use

- Select the gutta-percha tip that best matches the last instrument used to shape the canal.
- Slowly insert the gutta-percha to the final working length.
- Insert the accessory cones into the canal next to the master gutta-percha point.
- Heat the gutta-percha and compact vertically as desired.
- Close the canal with restorative material and complete the restoration.

Precautions

- Product for dental use only.
- Non-sterile product.
- Non-reusable product.
- Do not use autoclave or heat sterilize.
- Store in a cool, dry place.
- Carefully follow the recommended storage conditions. Failure to do so will cause the gutta-percha to harden prematurely resulting in procedural delays or require re-treatment for removal.
- Do not clean or sterilize the gutta-percha, this may render the device unusable.

Warnings

- Do not apply excessive force during lateral condensation in order to avoid vertical root fracture.
- Ensure proper site preparation by removing infected tissue/bone/dentin in order to prevent infection.
- Follow proper obturation techniques to avoid procedural accidents that could lead to persistent apical periodontitis infection.
- Do not use bent or distorted gutta-percha tips.
- If a heat source is used, check the temperature to ensure that the gutta-percha melts. Incorrect temperature setting may cause procedural delays or require re-treatment.
- Do not use the product after the expiration date.

You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device you supply to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.

The safety and clinical performance summary is available from EUDAMED and until that platform is fully operational, it can be requested from Dental World by sending an email to (info@dental-world.it) (Basic UDI-DI: 8050996CONIGUTTAT7)


Contraindications

Latex-sensitive patients may have an allergic reaction to gutta-percha.

Storage

- Store at room temperature.
- Store properly in their own packaging.
- Do not disperse in the environment.

Symbols

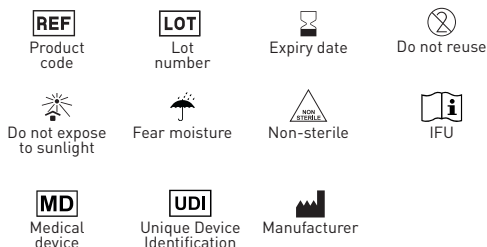

Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it