

Linea Maximus - Elastomeri

Fulcro di rotazione - Catenelle - Separatori
- Legature

Descrizione

Gli elastomeri ortodontici, realizzati in poliuretano ad alta densità, sono utilizzati per applicare forze ai denti e sono impiegati in ortodonzia per correggere diversi tipi di malocclusioni.

Indicazioni d'uso

- **I separatori elastici** sono utilizzati per aprire gli spazi interprossimali tra i denti e sono ideali per creare spazi tra i molari per il posizionamento di bande ortodontiche.
- **Le legature elastiche** sono utilizzate per fissare l'arco al bracket e solitamente vengono cambiate ad ogni regolazione.
- **Le catenelle elastiche** sono in grado di esercitare forze leggere e continue per movimenti ottimali dei denti.
- **Il fulcro di rotazione**, viene inserito sulle alette degli attacchi, in modo da indurre, sotto la pressione del filo, la rotazione del dente.

Procedura raccomandata

1. Selezionare la misura dell'elastomero (nel caso di: catenelle, legature e separatori).
2. Utilizzare una pinza ortodontica idonea per posizionare il dispositivo in uso.

Avvertenze

- Il prodotto deve essere utilizzato da ortodontisti professionisti qualificati.
- Solo per uso dentale.
- Non riutilizzare il prodotto.
- Prodotto non sterile.
- Istruire i pazienti a non masticare o mordere sostanze dure come caramelle dure, ghiaccio, carote, ecc.
- Durante l'igiene orale utilizzare uno spazzolino morbido e spazzolare delicatamente.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo

medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Controindicazioni

- Sospendere l'uso del prodotto in caso di reazione allergica.
- Non è consentito il riutilizzo, in tal caso potrebbero verificarsi contaminazioni crociate.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente.
- Conservare correttamente nella propria confezione.
- Proteggere da raggi solari o luce diretta.
- Non disperdere nell'ambiente.

Simboli



Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'inabilità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Linea Maximus - Elastomeri

Rotarion wedge - Chains - Separators -
Legatures

Description

Orthodontic elastomers, made of high-density polyurethane, are used to apply forces to teeth and are used in orthodontics to correct various types of malocclusions.

Indications for use

- **Elastic separators** are used to open interproximal spaces between teeth and are ideal for creating spaces between molars for placement of orthodontic bands.
- **Elastic ligatures** are used to secure the arch to the bracket and are usually changed at each adjustment.
- **Elastic chains** are capable of exerting light, continuous forces for optimal tooth movement.
- **The rotation wedge**, is inserted on the lugs of the brackets, so that under the pressure of the wire, the rotation of the tooth is induced.

Recommended procedure

1. Select the elastomer size (in the case of: chains, ligatures and separators).
2. Use a suitable orthodontic forceps to position the device in use.

Warnings

- The product should be used by qualified professional orthodontists.
- For dental use only.
- Do not reuse the product.
- Non sterile product.
- Instruct patients not to chew or bite hard substances such as hard candies, ice, carrots, etc.
- During oral hygiene, use a soft toothbrush and brush gently.

You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device you sup-

ply to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.


Contraindications

- Discontinue use of the product if an allergic reaction occurs.
- Reuse is not permitted, in which case cross-contamination may occur.
- Do not use after the expiration date.

Storage

- Store at room temperature.
- Store properly in its packaging.
- Protect from sunlight or direct light.
- Do not disperse into the environment.

Symbols

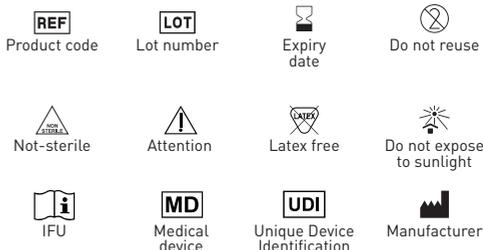

Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it