

# Linea Maximus

## Tubi buccali ortodontici

### Descrizione

I tubi buccali sono dispositivi utilizzati in ortodonzia per allineare e favorire il corretto posizionamento dei denti e sono spesso utilizzati insieme ad altri dispositivi ortodontici prescritti da un ortodontista professionista.

### Indicazioni d'uso

Fabbricati in acciaio inossidabile, i tubi sono posizionati sui denti del paziente con un adesivo e quindi collegati tra loro tramite archi e bande allo scopo di favorire movimenti precisi dei denti.

### Procedura raccomandata

1. Pulire la superficie del dente per rimuovere eccessi di tartaro, macchie, etc., quindi sciacquare con acqua e asciugare. Usare apribocca, rulli di cotone ed aspirare la saliva per facilitare la mordenzatura.
2. Applicare il mordenzante sulla superficie del dente sul quale deve essere posizionato il tubo.
3. Risciacquare e asciugare per rimuovere l'acido e i detriti in eccesso. A questo punto, la superficie del dente risulterà opaca.
4. Tracciare la linea di riferimento di posizionamento dell'attacco del tubo sulla superficie del dente utilizzando un posizionatore.
5. Applicare il primer sulla superficie del dente mordenzato, creando uno strato sottile. Successivamente applicare una quantità adeguata di adesivo sulla basetta, posizionare il tubo sulla superficie del dente e pressarlo leggermente. Rimuovere i residui di adesivo in tempo e mantenere liscia la superficie del dente attorno al tubo.
6. Polimerizzare l'adesivo con una lampada fotopolimerizzante in modo che il tubo sia saldamente fissato.

### Avvertenze

- Il prodotto deve essere utilizzato da ortodontisti professionisti qualificati.
- Solo per uso dentale.
- Non riutilizzare il prodotto.
- Prodotto non sterile.
- Istruire i pazienti a non masticare o mordere sostanze dure come caramelle dure, ghiaccio,

carote, ecc.

- In caso di reazione allergica, rimuovere immediatamente l'apparecchio ortodontico.
- I tubi ortodontici sono controindicati per coloro che sono allergici al cromo e al nichel.

**È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.**

### Controindicazioni

Fumo pesante, abuso di tabacco e alcol, malattie sistemiche del sangue, diabete incontrollato.

Il dispositivo non deve essere usato per pazienti con parodontite.

### Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente.
- Conservare correttamente nella propria confezione.
- Non disperdere nell'ambiente.

### Simboli



### Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'incapacità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

# Linea Maximus

## Orthodontic buccal tubes

### Description

Buccal tubes are devices used in orthodontics to align and promote proper tooth positioning and are often used in conjunction with other orthodontic devices prescribed by a professional orthodontist.

### Indications for use

Made of stainless steel, the tubes are placed on the patient's teeth with an adhesive and then connected to each other through arches and bands for the purpose of facilitating precise tooth movements.

### Recommended procedure

1. Clean the tooth surface to remove excess tartar, stains, etc., then rinse with water and dry. Use mouth openers, cotton rollers and suction saliva to facilitate etching.
2. Apply etchant to the surface of the tooth on which the tube is to be placed.
3. Rinse and dry to remove excess acid and debris. At this point, the tooth surface will be opaque.
4. Draw the reference line of tube attachment placement on the tooth surface using a positioner.
5. Apply primer to the etched tooth surface, creating a thin layer. Then apply an appropriate amount of adhesive to the base plate, place the tube on the tooth surface and press it lightly. Remove adhesive residue in time and keep the tooth surface smooth around the tube.
6. Polymerize the adhesive with a curing light so that the tube is firmly attached.

### Warnings

- The product should be used by qualified professional orthodontists.
- For dental use only.
- Do not reuse the product.
- Non sterile product.
- Instruct patients not to chew or bite hard substances such as hard candies, ice, carrots, etc.
- In case of an allergic reaction, remove the orthodontic retainer immediately.
- Orthodontic buccal tubes are contraindicated for those who are allergic to chromium and nickel.

**You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device you supply to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.**

### Contraindications


Heavy smoke, tobacco and alcohol abuse, systemic blood diseases, uncontrolled diabetes.

The device should not be used for patients with periodontitis.

### Storage

- Store at room temperature.
- Store properly in their own packaging.
- Do not disperse in the environment.

### Symbols

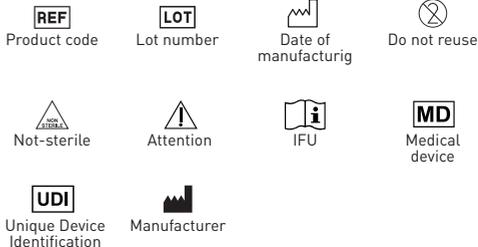

### Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: [info@dental-world.it](mailto:info@dental-world.it) / web: [www.dental-world.it](http://www.dental-world.it)