

IT - Eclipse

Elastici intraorali in lattice

Descrizione

Gli elastici in lattice sono utilizzati nel campo dell'ortodonzia per correggere diversi tipi di malocclusioni.

Indicazioni d'uso

Gli elastici intraorali sono indicati per il trattamento ortodontico in pazienti di tutte le età sotto prescrizione di un ortodontista.

Procedura raccomandata

1. Selezionare la dimensione corretta dell'elastico in lattice secondo il metodo ortodontico utilizzato.
2. Utilizzare una pinza ortodontica per l'applicazione dell'elastico sul dente interessato.
3. La durata di utilizzo è a discrezione dell'ortodontista.

Avvertenze

- Il prodotto deve essere utilizzato da ortodontisti professionisti qualificati.
- Solo per uso dentale.
- Non riutilizzare il prodotto.
- Prodotto non sterile.
- Istruire i pazienti a non masticare o mordere sostanze dure come caramelle dure, ghiaccio, carote, ecc.
- Durante l'igiene orale utilizzare uno spazzolino morbido e spazzolare delicatamente.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Controindicazioni

- Questi prodotti non devono essere utilizzati in pazienti allergici al lattice.
- Sospendere l'uso del prodotto in caso di reazione allergica.
- Non è consentito il riutilizzo, in tal caso potrebbero verificarsi contaminazioni crociate.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza

Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente.
- Conservare correttamente nella propria confezione.
- Proteggere da raggi solari o luce diretta.
- Non disperdere nell'ambiente.

Simboli



Codice prodotto



Numero lotto



Data di scadenza



Non riutilizzare



Non sterile



Attenzione



Contiene lattice



Non esporre ai raggi solari



Istruzioni d'uso



Dispositivo medico



Identificazione unica del dispositivo



Fabbricante

Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'incapacità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

EN - Eclipse

Intraoral latex elastics

Description

Latex elastics are used in the field of orthodontics to correct various types of malocclusions.

Indications for use

Intraoral elastics are indicated for orthodontic treatment in patients of all ages under prescription from an orthodontist.

Recommended procedure

1. Select the correct size of latex rubber band according to the orthodontic method used.
2. Use orthodontic forceps to apply the rubber band to the affected tooth.
3. The duration of use is at the discretion of the orthodontist.

Warnings

- The product should be used by qualified professional orthodontists.
- For dental use only.
- Do not reuse the product.
- Non sterile product.
- Instruct patients not to chew or bite hard substances such as hard candies, ice, carrots, etc.
- In case of an allergic reaction, remove the orthodontic retainer immediately.
- During oral hygiene, use a soft toothbrush and brush gently.

You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device you supply to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.


Contraindications

- These products should not be used in patients allergic to latex.
- Discontinue use of the product if an allergic reaction occurs.
- Reuse is not permitted, in which case cross-contamination may occur.
- Do not use after the expiration date.

Storage

- Store at room temperature.
- Store properly in their own packaging.
- Protect from sunlight or direct light.
- Do not disperse in the environment.

Symbols

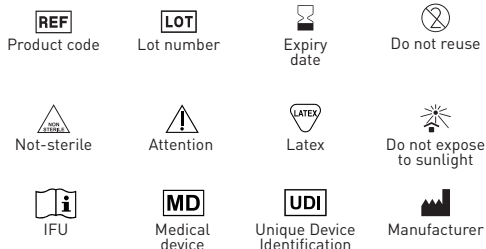

Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

FR - Eclipse

Elastiques intra-oraux en latex

Description

Les élastiques en latex sont utilisés en orthodontie pour corriger divers types de malocclusions.

Indications d'utilisation

Les élastiques intra-oraux sont indiqués pour le traitement orthodontique des patients de tous âges sur prescription d'un orthodontiste.

Procédure recommandée

1. Choisir la bonne taille d'élastique en latex en fonction de la méthode orthodontique utilisée.
2. Utiliser une pince orthodontique pour appliquer l'élastique sur la dent concernée.
3. La durée d'utilisation est laissée à l'appréciation de l'orthodontiste.

Avertissements

- Le produit doit être utilisé par des orthodontistes professionnels qualifiés.
- Réservé à un usage dentaire.
- Ne pas réutiliser le produit.
- Produit non stérile.
- Demander aux patients de ne pas mâcher ou mordre des substances dures telles que des bonbons durs, de la glace, des carottes, etc.
- Lors de l'hygiène bucco-dentaire, utilisez une brosse à dents souple et brossez-vous doucement.

Vous devez signaler tout incident grave lié au dispositif médical que vous avez fourni au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous vous trouvez.

Contre-indications

- Ces produits ne doivent pas être utilisés chez les patients présentant une allergie au latex.
- Suspendre l'utilisation du produit en cas de réaction allergique.
- La réutilisation n'est pas autorisée, car elle peut entraîner une contamination croisée.
- Ne pas utiliser après la date de péremption

Conservation

- Conserver à température ambiante.
- Conserver correctement dans l'emballage.
- Protéger de la lumière du soleil ou de la lumière directe.
- Ne pas disperser dans l'environnement.

Symboles

 Code du produit	 Numéro du lot	 Date d'expiration	 Ne pas réutiliser
 Non stérile	 Attention	 Contient du latex	 Ne pas exposer à la lumière du soleil
 Instructions d'utilisation	 Dispositif médical	 Identification unique du dispositif	 Fabricant

Garantie

Dental World remplacera le produit s'il s'avère défectueux.

Dental World n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou perte, direct ou consécutif, résultant de l'utilisation négligente ou de l'incapacité d'utiliser le produit décrit. Avant l'utilisation, il incombe à l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à son utilisation. L'utilisateur assume la responsabilité de l'utilisation négligente.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

ES - Eclipse

Elásticos intraorales de látex

Descripción

Los elásticos de látex se utilizan en ortodoncia para corregir diversos tipos de maloclusiones.

Indicaciones de uso

Los elásticos intraorales están indicados para el tratamiento ortodóncico en pacientes de todas las edades bajo prescripción de un ortodoncista.

Procedimiento recomendado

1. Seleccionar el tamaño correcto de goma elástica de látex según el método de ortodoncia que se esté utilizando.
2. Utilizar alicates de ortodoncia para aplicar la banda elástica al diente afectado.
3. La duración del uso queda a criterio del ortodoncista.

Advertencias

- El producto debe ser utilizado por ortodoncistas profesionales cualificados.
- Sólo para uso dental.
- No reutilizar el producto.
- Producto no estéril.
- Instruir a los pacientes para que no mastiquen ni muerdan sustancias duras como caramelos duros, hielo, zanahorias, etc.
- Durante la higiene bucal utilice un cepillo de dientes suave y cepille con suavidad.

Debe informar al fabricante y a la autoridad competente de su Estado miembro de cualquier incidente grave que se produzca en relación con el producto sanitario que ha suministrado.

Contraindicaciones

- Estos productos no deben utilizarse en pacientes con alergia al látex.
- Suspender el uso del producto en caso de reacción alérgica.
- No está permitida la reutilización, en cuyo caso puede producirse contaminación cruzada.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.

Almacenamiento

- Conservar a temperatura ambiente.
- Conservar correctamente en el envase.
- Proteger de la luz solar o directa.
- No dispersar en el ambiente.

Símbolos



Código del producto



Número de lote



Fecha de caducidad



No reutilizar



No estéril



Atención



Contiene látex



No exponer a la luz solar



Instrucciones de uso



Producto sanitario



Identificación única del producto



Fabricante

Garantía

Dental World sustituirá el producto si resulta defectuoso. Dental World no se hace responsable de los daños o pérdidas, directos o indirectos, resultantes de un uso descuidado o de la incapacidad de utilizar el producto descrito. Antes de su uso, es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su uso. El usuario asume la responsabilidad por el uso descuidado.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

vc - Eclipse

Интраорални латексови ластици

Описание

Латексовите ластици се използват в областта на ортодонтията за коригиране на различни видове малоклузии.

Показания за употреба

Интраоралните ластици са показани за ортодонтоско лечение при пациенти от всички възрасти по предписание на ортодонт.

Препоръчителна процедура

1. Изберете правилния размер латексов ластик в зависимост от използвания ортодонтоски метод.
2. Използвайте ортодонтоски щипки, за да приложите гумената лента към засегнатия зъб.
3. Продължителността на използване е по преценка на ортодонта.

Предупреждения

- Продуктът трябва да се използва от квалифицирани професионални ортодонти.
- Само за стоматологична употреба.
- Не използвайте продукта повторно.
- Нестерилен продукт.
- Инструктирайте пациентите да не дъвчат или хапят твърди вещества, като твърди бонбони, лед, моркови и др.
- В случай на алергична реакция незабавно свалете ортодонтоския фиксатор.
- По време на устната хигиена използвайте мека четка за зъби и я почиствайте внимателно.

Трябва да съобщавате на производителя и на компетентния орган на държавата-членка, в която се намирате, за всички сериозни инциденти, възникнали във връзка с медицинското изделие, което доставяте.

Контраиндикации

- Тези продукти не трябва да се използват при пациенти, алергични към латекс.
- Преустановете употребата на продукта, ако се появи алергична реакция.
- Повторната употреба не е разрешена, тъй като в този случай може да възникне

кръстосано замърсяване.

- Да не се използва след изтичане на срока на годност.

Съхранение

- Съхранявайте при стайна температура.
- Съхранявайте правилно в собствената си опаковка.
- Защитете от слънчева или пряка светлина.
- Да не се разпръсква в околната среда.

Символи



Код на продукта



Номер на партидата



Срок на годност



Да не се използва повторно



Нестерилен



Внимание



съдържа латекс



Да не се излага на слънчева светлина



Инструкции за употреба



Медицинско изделие



Уникална идентификация на устройството



Производител

Гаранция

Dental World заменя продукта, ако се окаже, че той е дефектен.

Dental World не поема отговорност за каквито и да било преки или последващи щети или загуби, произтичащи от небрежна употреба или невъзможност за използване на описания продукт. Преди употреба потребителят носи отговорност за това, че да определи доколко продуктът е подходящ за неговата употреба. Потребителят поема отговорност за използването на небрежна употреба.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

HR - Eclipse

Intraoralne lateks elastike

Opis

Lateks elastika se koristi u ortodonciji za ispravljanje različitih vrsta malokluzija.

Indikacije za uporabu

Intraoralna elastika indicirana je za ortodonski tretman kod pacijenata svih dobnih skupina prema receptu ortodonta.

Preporučeni postupak

1. Odaberite ispravnu veličinu lateks gumene trake prema korištenoj ortodonskoj metodi.
2. Koristite ortodonske pincete za postavljanje gumene trake na zahvaćeni zub.
3. Trajanje uporabe je na diskreciju ortodonta.

Upozorenja

- Proizvod trebaju koristiti kvalificirani profesionalni ortodonti.
- Samo za stomatološku uporabu.
- Ne koristite proizvod ponovno.
- Nesterilni proizvod.
- Uputite pacijente da ne žvaču ili grizu tvrde tvari poput tvrdih bombona, leda, mrkve itd.
- U slučaju alergijske reakcije, odmah uklonite ortodonski retainer.
- Tijekom oralne higijene koristite meku četkicu za zube i nježno perite zube.

Morate prijaviti sve ozbiljne incidente koji se dogode u vezi s medicinskim proizvodom koji isporučujete proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazite.

Kontraindikacije

- Ove proizvode ne smiju koristiti pacijenti alergični na lateks.
- Prekinite s upotrebom proizvoda ako se pojavi alergijska reakcija.
- Ponovna upotreba nije dopuštena, u kojem slučaju može doći do unakrsne kontaminacije.
- Ne koristiti nakon isteka roka trajanja.

Skladištenje

- Čuvati na sobnoj temperaturi.
- Pravilno čuvati u vlastitom pakiranju.
- Zaštititi od sunčeve svjetlosti ili izravne svjetlosti.
- Ne raspršivati u okolišu.

Simboli



Jamstvo

Dental World će zamijeniti proizvod koji se pokaže neispravnim.

Dental World ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravni ili posljedični koji proizlaze iz nemara ili nemogućnosti korištenja opisanog proizvoda. Korisnik je prije uporabe odgovoran utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu ili njezinu uporabu. Korisnik preuzima odgovornost za nepažljivo korištenje.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

cs - Eclipse

Intraorální latexové gumičky

Popis

Latexové gumičky se používají v ortodoncii ke korekci různých typů vad skusu.

Indikace k použití

Intraorální gumičky jsou indikovány k ortodontické léčbě u pacientů všech věkových kategorií na základě předpisu ortodontisty.

Doporučený postup

1. Vyberte správnou velikost latexové gumičky podle použité ortodontické metody.
2. Pomocí ortodontických kleští přiložte gumičku k postiženému zubu.
3. Doba používání je na uvážení ortodontisty.

Upozornění

- Výrobek by měli používat kvalifikovaní profesionální ortodontisté.
- Určeno pouze pro stomatologické použití.
- Výrobek nepoužívejte opakovaně.
- Nesterilní výrobek.
- Poučte pacienty, aby nežvýkali a nekousali tvrdé látky, jako jsou tvrdé bonbony, led, mrkev apod.
- V případě alergické reakce ortodontický retainer okamžitě vyjměte.
- Při ústní hygieně používejte měkký zubní kartáček a zuby čistěte jemně.

Veškeré závažné události, které se vyskytnou v souvislosti s dodávaným zdravotnickým prostředkem, musíte hlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se nacházíte.

Kontraindikace

- Tyto produkty by neměli používat pacienti alergičtí na latex.
- Pokud se objeví alergická reakce, přestaňte produkt používat.
- Opakované použití není povoleno, v takovém případě může dojít ke křížové kontaminaci.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Skladování

- Skladujte při pokojové teplotě.
- Skladujte řádně v původním obalu.
- Chraňte před slunečním zářením a přímým světlem.
- Nerozptylujte do životního prostředí.

Symbols



Záruka

Společnost Dental World vymění výrobek, pokud se ukáže, že je vadný.

Společnost Dental World nepřebírá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vzniklé v důsledku neopatrného používání nebo nemožnosti používat popsany výrobek. Před použitím je povinností uživatele zjistit vhodnost výrobku pro jeho použití. Uživatel přebírá odpovědnost za neopatrné použití.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

DA - Eclipse

Intraorale latex-elastikker

Beskrivelse

Latexelastikker bruges inden for ortodonti til at korrigere forskellige typer af malokklusioner.

Indikationer for brug

Intraorale elastikker er indiceret til ortodontisk behandling af patienter i alle aldre efter ordination fra en ortodontist.

Anbefalet procedure

1. Vælg den korrekte størrelse latexgummibånd i henhold til den anvendte ortodontiske metode.
2. Brug en ortodontisk tang til at sætte elastikken på den berørte tand.
3. Varigheden af brugen afgøres af ortodontisten.

Advarsler

- Produktet bør anvendes af kvalificerede professionelle ortodontister.
- Kun til tandlægebrug.
- Produktet må ikke genbruges.
- Ikke-sterilt produkt.
- Bed patienten om ikke at tygge eller bide i hårde stoffer som f.eks. slik, is, gulerødder osv.
- I tilfælde af en allergisk reaktion skal den ortodontiske bøjle straks fjernes.
- Ved mundhygiejne skal du bruge en blød tandbørste og børste forsigtigt.

Du skal indberette alle alvorlige hændelser i forbindelse med det medicinske udstyr, du leverer, til producenten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor du befinder dig.


Kontraindikationer

- Disse produkter bør ikke anvendes til patienter, der er allergiske over for latex.
- Afbryd brugen af produktet, hvis der opstår en allergisk reaktion.
- Genbrug er ikke tilladt, da der i så fald kan forekomme krydskontaminering.
- Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Opbevaring

- Opbevares ved stuetemperatur.
- Opbevares korrekt i egen emballage.
- Beskyt mod sollys eller direkte lys.
- Må ikke spredes i miljøet.

Symboler

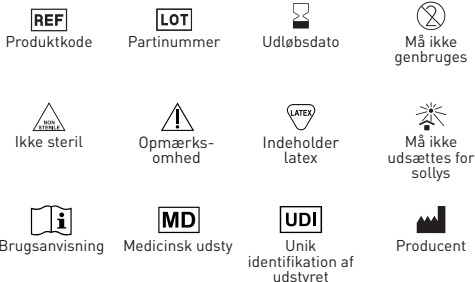

Garanti

Dental World erstatter produktet, hvis det viser sig at være defekt.

Dental World påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller følgeskader, som skyldes uforsigtig brug eller manglende evne til at bruge det beskrevne produkt. Før brug er det brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til den pågældende anvendelse. Brugeren påtager sig ansvaret for uforsigtig brug.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

NL - Eclipse

Intraorale latex elastieken

Beschrijving

Latex elastieken worden gebruikt op het gebied van orthodontie om verschillende soorten beetanomalie te corrigeren.

Gebruiksindicaties

Intraorale elastieken zijn geïndiceerd voor orthodontische behandeling bij patiënten van alle leeftijden op voorschrift van een orthodontist.

Aanbevolen procedure

1. Selecteer de juiste maat latex elastiek volgens de gebruikte orthodontische methode.
2. Gebruik een orthodontische tang om het elastiekje op de aangetaste tand of kies aan te brengen.
3. De duur van het gebruik is ter beoordeling van de orthodontist.

Waarschuwingen

- Het product moet worden gebruikt door gekwalificeerde professionele orthodontisten.
- Alleen voor tandheelkundig gebruik.
- Het product niet opnieuw gebruiken.
- Niet steriel product.
- Instrueer patiënten niet te kauwen of te bijten op harde substanties zoals harde snoepjes, ijs, wortels, enz.
- Verwijder de orthodontische retainer onmiddellijk in geval van een allergische reactie.
- Gebruik tijdens de mondhygiëne een zachte tandenborstel en poets voorzichtig.

U moet alle ernstige incidenten in verband met het door u geleverde medische hulpmiddel melden aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin u zich bevindt.


Contro-indicaties

- Deze producten mogen niet gebruikt worden bij patiënten die allergisch zijn voor latex.
- Stop het gebruik van het product als een allergische reactie optreedt.
- Hergebruik is niet toegestaan, in dat geval kan kruisbesmetting optreden.
- Niet gebruiken na de vervaldatum.

Opslag

- Bewaren bij kamertemperatuur.
- Goed bewaren in de eigen verpakking.
- Bescherm tegen zonlicht of direct licht.
- Niet in de omgeving verspreiden.

Symbolen

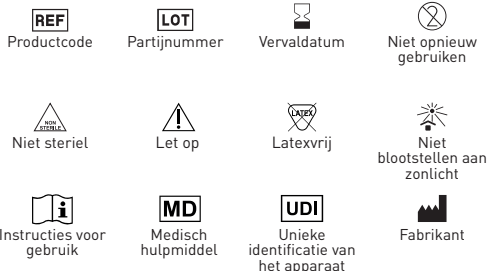

Garantie

Dental World vervangt het product als het defect blijkt te zijn.

Dental World aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van onzorgvuldig gebruik of het niet kunnen gebruiken van het beschreven product. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik vast te stellen of het product geschikt is voor zijn gebruik. De gebruiker is aansprakelijk voor onzorgvuldig gebruik.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

ET - Eclipse

Intraoraalsed lateksist kummikud

Kirjeldus

Lateksist kummiplaate kasutatakse ortodontia valdkonnas mitmesuguste hambumusvaeguste korrigeerimiseks.

Kasutamise näidustused

Intraoraalne elastika on näidustatud ortodontilise ravi puhul igas vanuses patsientidel ortodonti ettekirjutuse alusel.

Soovitav protseduur

1. Valige õige suurusega lateksist kummipael vastavalt kasutatavale ortodontilisele meetodile.
2. Kasutage ortodontilisi pintsette, et kanda kummipael kahjustatud hambale.
3. Kasutamise kestus on ortodonti otsustada.

Hoiatused

- Toodet peaksid kasutama kvalifitseeritud professionaalsed ortodontid.
- Ainult hambaravis kasutamiseks.
- Ärge kasutage toodet uuesti.
- Mittesteriilne toode.
- Juhendada patsienti mitte närida või hammustada kõvasid aineid, nagu kõvad kommid, jää, porgandid jne.
- Allergilise reaktsiooni korral eemaldage ortodontiline hoidik kohe.
- Kasutage suuhügieeni ajal pehmet hambaharja ja harjake õrnalt.

Te peate teatama kõigist tõsistest vahejuhtumitest, mis on seotud teie poolt tarnitava meditsiiniseadmega, tootjale ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus te asute.

Vastunäidustused

- Neid tooteid ei tohi kasutada patsientidel, kes on lateksi suhtes allergilised.
- Allergilise reaktsiooni tekkimisel katkesta toote kasutamine.
- Kasutamine ei ole lubatud, sel juhul võib tekkida ristsaastumine.
- Ei tohi kasutada pärast kõlblikkusaega.

Säilitamine

- Säilitada toatemperatuuril.
- Säilitada nõuetekohaselt oma pakendis.
- Kaitske päikesevalguse või otsese valguse eest.
- Mitte hajutada keskkonda.

Sümbolid

 Tootekood	 Partii number	 Aegumiskuupäev	 Mitte korduvkasutada
 Mitte-steriilsed	 Tähelepanu	 Sisaldab lateksi	 Ei puutu kokku päikesevalgusega
 Kasutusjuhend	 Meditsiiniline seade	 Unikaalne seadme identifitseerimine	 Tootja

Garantii

Dental World vahetab toote välja, kui see osutub defektseks.

Dental World ei võta vastutust mis tahes otsese või kaudse kahju eest, mis tuleneb kirjeldatud toote hooletust kasutamisest või mittekasutamisest. Enne kasutamist peab kasutaja ise kindlaks tegema, kas toode on tema jaoks sobiv. Kasutaja võtab vastutuse hooletu kasutamise eest.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

DE - Eclipse

Intraorale Latex-Gummibänder

Beschreibung

Latex-Elastika werden im Bereich der Kieferorthopädie zur Korrektur verschiedener Arten von Zahnfehlstellungen verwendet.

Anwendungsgebiete

Intraorale Gummizüge sind für die kieferorthopädische Behandlung von Patienten aller Altersgruppen nach Verordnung durch einen Kieferorthopäden indiziert.

Empfohlene Vorgehensweise

1. Wählen Sie die richtige Größe des Latexgummibandes entsprechend der verwendeten kieferorthopädischen Methode.
2. Verwenden Sie eine kieferorthopädische Pinzette, um das Gummiband an dem betroffenen Zahn anzubringen.
3. Die Dauer der Anwendung liegt im Ermessen des Kieferorthopäden.

Warnhinweise

- Das Produkt sollte nur von qualifizierten Kieferorthopäden verwendet werden.
- Nur für den zahnärztlichen Gebrauch.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Nicht steriles Produkt.
- Weisen Sie den Patienten an, keine harten Substanzen wie Bonbons, Eis, Karotten usw. zu kauen oder zu beißen.
- Im Falle einer allergischen Reaktion den kieferorthopädischen Retainer sofort entfernen.
- Verwenden Sie bei der Mundhygiene eine weiche Zahnbürste und putzen Sie sanft.

Sie müssen alle schwerwiegenden Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem von Ihnen gelieferten Medizinprodukt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem Sie sich befinden, melden.

Kontraindikationen

- Diese Produkte sollten nicht bei Patienten verwendet werden, die allergisch auf Latex reagieren.
- Beim Auftreten einer allergischen Reaktion ist die Verwendung des Produkts abzubrechen.
- Eine Wiederverwendung ist nicht zulässig, da es in diesem Fall zu einer Kreuzkontamination kommen kann.
- Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

Lagerung

- Bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Richtig in der Verpackung aufbewahren.
- Vor Sonnenlicht oder direktem Licht schützen.
- Nicht in der Umwelt verstreuen.

Symbole



Garantie

Dental World tauscht das Produkt aus, wenn es sich als fehlerhaft erweist.

Dental World haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die sich ergeben aus oder der Unfähigkeit, das beschriebene Produkt zu verwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem Gebrauch die Eignung des Produkts für seine Verwendung festzustellen.

Der Benutzer übernimmt die Verantwortung für die unvorsichtige Verwendung.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

EL - Eclipse

Ενδοστοματικά ελαστικά λατέξ

Περιγραφή

Τα ελαστικά από λάτεξ χρησιμοποιούνται στον τομέα της ορθοδοντικής για τη διόρθωση διαφόρων τύπων δυσμορφιών.

Ενδείξεις χρήσης

Τα ενδοστοματικά λάστιχα ενδείκνυνται για ορθοδοντική θεραπεία σε ασθενείς όλων των ηλικιών κατόπιν συνταγογράφησης από ορθοδοντικό.

Συνιστώμενη διαδικασία

1. Επιλέξτε το σωστό μέγεθος λαστιχένιας ελαστικής ταινίας λατέξ ανάλογα με την ορθοδοντική μέθοδο που χρησιμοποιείται.
2. Χρησιμοποιήστε ορθοδοντική λαβίδα για να εφαρμόσετε το λαστικό στο προσβεβλημένο δόντι.
3. Η διάρκεια χρήσης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ορθοδοντικού.

Προειδοποιήσεις

- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες ορθοδοντικούς.
- Μόνο για οδοντιατρική χρήση.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε το προϊόν.
- Μη αποστειρωμένο προϊόν.
- Δώστε οδηγίες στους ασθενείς να μην μασάνε ή δαγκώνουν σκληρές ουσίες, όπως σκληρές καραμέλες, πάγο, καρότα κ.λπ.
- Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, αφαιρέστε αμέσως τον ορθοδοντικό συγκρατητήρα.
- Κατά τη διάρκεια της στοματικής υγιεινής, χρησιμοποιήστε μαλακή οδοντόβουρτσα και βουρτσίζετε απαλά.

Πρέπει να αναφέρετε κάθε σοβαρό περιστατικό που συμβαίνει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν που προμηθεύετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

Αντενδείξεις

- Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με αλλεργία στο λατέξ.
- Διακόψτε τη χρήση του προϊόντος εάν εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση.
- Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση,

οπότε ενδέχεται να προκύψει διασταυρούμενη μόλυνση.

- Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

Αποθήκευση

- Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου.
- Φυλάσσετε σωστά στη δική τους συσκευασία.
- Προστατέψτε από το ηλιακό φως ή το άμεσο φως.
- Να μην διασκορπίζεται στο περιβάλλον.

Σύμβολα

 Κωδικός προϊόντος	 Αριθμός παρτίδας	 Ημερομηνία λήξης	 Να μην επαναχρησιμοποιηθεί
 Όχι στείρα	 Προσοχή	 Περιέχει λατέξ	 Μην το εκθέτετε στο ηλιακό φως
 Οδηγίες χρήσης	 Ιατρική συσκευή	 Μοναδική αναγνώριση της συσκευής	 Κατασκευαστής

Εγγύηση

Dental World αντικαθιστά το προϊόν εάν αποδειχθεί ελαττωματικό.

Dental World δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, άμεση ή επακόλουθη, που προκύπτει από.

απρόσεκτη χρήση ή αδυναμία χρήσης του περιγραφόμενου προϊόντος. Πριν από τη χρήση, είναι ευθύνη του χρήστη.

να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση απρόσεκτη χρήση.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it



HU - Eclipse

Intraorális latex gumik

Leírás

A latex gumikötéseket az ortodontia területén használják a különböző típusú malokluzsiók korrekciójára.

Használati javallatok

Az intraorális gumik minden korosztályú pácienseknél ortodontiai kezelésre javallottak, ortodontológus által felírva.

Ajánlott eljárás

1. Válassza ki a megfelelő méretű latex gumiszalagot az alkalmazott fogszabályozási módszernek megfelelően.
2. Használjon ortodontiai fogócsipeszt a gumiszalagnak az érintett fogra történő felhelyezéséhez.
3. A használat időtartama a fogszabályozó orvos belátása szerint.

Figyelmeztetések

- A terméket csak szakképzett, hivatásos fogszabályozó orvosok használhatják.
- Kizárólag fogászati felhasználásra.
- Ne használja fel újra a terméket.
- Nem steril termék.
- Utasítsa a beteget, hogy ne rágjon vagy harapjon kemény anyagokat, például kemény cukorkát, jeget, sárgarépat stb.
- Allergiás reakció esetén azonnal távolítsa el a fogszabályozót.
- A szájhygiénia során használjon puha fogkefét és óvatosan keféljen.

Az Ön által ellátott orvostechnikai eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos eseményeket jelelnie kell a gyártónak és a lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Ellenjavallatok

- Ezek a termékek nem használhatók latexallergiás betegeknél.
- Allergiás reakció esetén hagyja abba a termék használatát.
- Újrafelhasználás nem megengedett, ebben


az esetben keresztkontamináció léphet fel.

- Ne használja a lejáratí idő után.

Tárolás

- Szobahőmérsékleten tárolja.
- Tárolja megfelelően a saját csomagolásában.
- Védje a napfénytől vagy közvetlen fénytől.
- Ne szóródjon szét a környezetben.

Szimbólumok

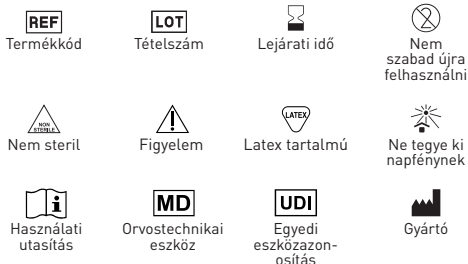

Garancia

A Dental World kicseréli a terméket, ha az hibásnak bizonyul.

A Dental World nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy veszteségért, amely a leírt termék gondatlan használatából vagy használhatatlanságából ered. Használat előtt a felhasználó felelőssége, hogy megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra. A gondatlan használatért a felhasználó vállalja a felelősséget.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Lv - Eclipse

Intraorālās lateksa gumijas

Apraksts

Lateksa elastikas tiek izmantotas ortodontijas jomā, lai koriģētu dažāda veida sakodiena problēmas.

Lietošanas indikācijas

Intraorālās gumijas ir indicētas ortodontiskai ārstēšanai visu vecumu pacientiem pēc ortodonta norādījuma.

Ieteicamā procedūra

1. Atbilstoši izmantotajai ortodontiskajai metodei izvēlieties pareizo lateksa gumijas izmēru.
2. Ar ortodontiskām knaiblītēm uzlieciet gumiju uz skarto zobu.
3. Lietošanas ilgums ir atkarīgs no ortodonta ieskatiem.

Brīdinājumi

- Produkts jālieto kvalificētiem profesionāliem ortodontiem.
- Tikai lietošanai zobārstniecībā.
- Neizmantojiet izstrādājumu atkārtoti.
- Ne sterilis produkts.
- Norādiet pacientiem, ka nedrīkst košļāt vai kodināt cietas vielas, piemēram, cietas konfektes, ledus, burkānus u. c.
- Alerģiskas reakcijas gadījumā nekavējoties izņemiet ortodontisko fiksatoru.
- Veicot mutes dobuma higiēnu, izmantojiet mīkstu zobu birsti un saudzīgi tīriet zobus.

Jums ir jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā Jūs atrodaties, par visiem nopietniem negadījumiem, kas saistīti ar Jūsu piegādāto medicīnas ierīci.

Kontrindikācijas

- Šos produktus nedrīkst lietot pacientiem, kuriem ir alerģija pret lateksu.
- Ja rodas alerģiska reakcija, jāpārtrauc produkta lietošana.
- Atkārtota lietošana nav atļauta, jo tādā gadījumā var rasties krusteniskā kontaminācija.
- Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

Uzglabāšana

- Uzglabāt istabas temperatūrā.
- Pareizi uzglabāt savā iepakojumā.

- Aizsargājiet no saules gaismas vai tiešas gaismas.
- Neizplatīt vidē.

Simboli



Garantija

Dental World nomaina izstrādājumu, ja tas izrādās bojāts.

Dental World neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies aprakstītā izstrādājuma neuzmanīgas lietošanas vai nespējas to lietot dēļ. Pirms lietošanas lietotājs ir atbildīgs par to, lai noteiktu, vai izstrādājums ir piemērots tā lietošanai. Lietotājs uzņemas atbildību par neuzmanīgu lietošanu.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

LT - „Eclipse“

Intraoralinės latekso gumos

Aprašymas

Latekso gumos naudojamos ortodontijos srityje įvairioms sąkandžio ydoms koreguoti.

Naudojimo indikacijos

Intraoralinės elastinės gumos skirtos ortodontiniam gydymui bet kokiame amžiaus pacientams pagal gydytojo ortodonto paskyrimą.

Rekomenduojama procedūra

1. Pasirinkite tinkamo dydžio latekso gumelę pagal naudojamą ortodontinį metodą.
2. Ortodontinėmis žnyplėmis pritvirtinkite gumytę prie pažeisto danties.
3. Naudojimo trukmė priklauso nuo gydytojo ortodonto nuožiūros.

Įspėjimai

- Produktą turi naudoti kvalifikuoti profesionalūs ortodontai.
- Skirta naudoti tik odontologams.
- Nenaudokite gaminio pakartotinai.
- Nesterilus produktas.
- Nurodymas pacientams nekramtyti ir nekąsti kietų medžiagų, pavyzdžiui, kietų saldinių, ledo, morkų ir pan.
- Kilus alerginei reakcijai, nedelsiant išimkite ortodontinį laikiklį.
- Burnos higienos metu naudokite minkštą dantų šepetėlį ir valykite švelniai.

Apie visus rimtus incidentus, susijusius su jūsų tiekiamu medicinos prietaisu, privalote pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje esate, kompetentingai institucijai.

Kontroindikacijos

- Šių produktų negalima naudoti pacientams, alergiškiems lateksui.
- Jei pasireiškia alerginė reakcija, nutraukite produkto naudojimą.
- Pakartotinai naudoti negalima, nes tokiu atveju gali atsirasti kryžminė tarša.

- Nenaudokite pasibaigus tinkamumo vartoti terminui.

Laikymas

- Laikyti kambario temperatūroje.
- Tinkamai laikyti savo pakuotėje.
- Saugokite nuo saulės spindulių ar tiesioginės šviesos.
- Neskleisti aplinkoje.

Simboliai



Garancia

A Dental World kicseréli a terméket, ha az hibásnak bizonyul.

A Dental World nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetlen kárért vagy veszteségért, amely a leírt termék gondatlan használatából vagy használhatatlanságából ered. Használat előtt a felhasználó felelőssége, hogy megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra. A gondatlan használatért a felhasználó vállalja a felelősséget.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

PL - Eclipse

Wewnątrzrustne gumki lateksowe

Opis

Gumki lateksowe są stosowane w ortodoncji do korygowania różnego rodzaju wad zgryzu.

Wskazania do stosowania

Gumki wewnątrzrustne są wskazane do leczenia ortodontycznego u pacjentów w każdym wieku na podstawie zalecenia ortodonta.

Zalecana procedura

1. Wybierz odpowiedni rozmiar gumki lateksowej w zależności od stosowanej metody ortodontycznej.
2. Użyj kleszczy ortodontycznych, aby nałożyć gumkę na uszkodzony ząb.
3. Czas stosowania zależy od uznania ortodonta.

Ostrzeżenia

- Produkt powinien być stosowany przez wykwalifikowanych ortodontów.
- Wyłącznie do użytku stomatologicznego.
- Nie używać produktu ponownie.
- Produkt niejąłowy.
- Należy poinstruować pacjentów, aby nie żuili ani nie gryzli twardych substancji, takich jak twarde cukierki, łód, marchew itp.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast zdjąć retainer ortodontyczny.
- Podczas higieny jamy ustnej należy używać miękkiej szczoteczki do zębów i delikatnie szczotkować zęby.

Wszelkie poważne incydenty związane z dostarczanym wyrobem medycznym należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się użytkownik.

Przeciwwskazania

- Produkty te nie powinny być stosowane u pacjentów uczulonych na lateks.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie produktu.
- Ponowne użycie nie jest dozwolone, w takim przypadku może dojść do zanieczyszczenia krzyżowego.
- Nie używać po upływie daty ważności.


Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Przechowywać prawidłowo we własnym opakowaniu.
- Chronić przed światłem słonecznym lub

bezpośrednim światłem.

- Nie rozpraszać w środowisku.

Symbole

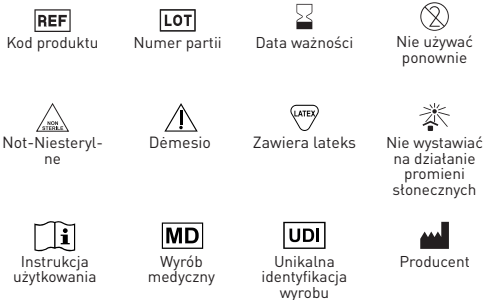

Gwarancja

Dental World wymieni produkt, jeśli okaże się on wadliwy.

Dental World nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty, bezpośrednie lub wtórne, wynikające z nieostrożnego użycia lub niemożności użycia opisanego produktu. Przed użyciem użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt jest odpowiedni do jego zastosowania. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za nieostrożne użytkowanie.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

PT - Eclipse

Elásticos intra-orais de látex

Descrição

Os elásticos de látex são utilizados em ortodontia para corrigir vários tipos de más oclusões.

Indicações de utilização

Os elásticos intra-orais são indicados para o tratamento ortodôntico em pacientes de todas as idades, sob prescrição de um odontologista.

Procedimento recomendado

1. Selecionar o tamanho correto do elástico de látex de acordo com o método ortodôntico utilizado.
2. Utilizar um alicate ortodôntico para aplicar a banda de borracha no dente afetado.
3. A duração da utilização fica ao critério do ortodontista.

Advertências

- O produto deve ser utilizado por ortodontistas profissionais qualificados.
- Somente para uso dentário.
- Não reutilizar o produto.
- Produto não esterilizado.
- Instruir os pacientes para não mastigarem ou morderem substâncias duras, tais como rebuçados, gelo, cenouras, etc.
- Durante a higiene oral, utilizar uma escova de dentes macia e escovar suavemente.

Deve comunicar quaisquer incidentes graves relacionados com o dispositivo médico que forneceu ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde se encontra.

Contra-indicações

- Estes produtos não devem ser utilizados em doentes com alergia ao látex.
- Suspender a utilização do produto em caso de reação alérgica.
- Não é permitida a reutilização, caso em que pode ocorrer contaminação cruzada.
- Não utilizar após o prazo de validade

Conservação

- Conservar à temperatura ambiente.
- Conservar corretamente na embalagem.
- Proteger da luz solar ou da luz direta.
- Não dispersar no ambiente.

Símbolos



Garantia

Dental World substituirá o produto se este se revelar defeituoso. Dental World não aceita responsabilidade por qualquer dano ou perda directa ou consequente resultante de utilização descuidada ou incapacidade de utilizar o produto descrito. Antes da utilização, é da responsabilidade do utilizador para determinar a adequação do produto à sua utilização. O utilizador assume a responsabilidade pela utilização uso descuidado.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

RO - Eclipse

Elastice intraorale din latex

Descriere

Elasticele din latex sunt utilizate în domeniul ortodonției pentru corectarea diferitelor tipuri de malocluzii.

Indicații de utilizare

Elasticii intraorali sunt indicați pentru tratamentul ortodontic la pacienții de toate vârstele, sub prescripția unui ortodont.

Procedura recomandată

- Selectați dimensiunea corectă a elasticului din latex în funcție de metoda ortodontică utilizată.
- Utilizați o pensetă ortodontică pentru a aplica banda de cauciuc pe dintele afectat.
- Durata de utilizare este la discreția ortodontistului.

Avertismente

- Produsul trebuie utilizat de către ortodonți profesioniști calificați.
- Numai pentru uz dentar.
- Nu reutilizați produsul.
- Produs nesteril.
- Instruiți pacienții să nu mestece sau să muște substanțe dure, cum ar fi bomboane tari, gheață, carroți etc.
- În cazul unei reacții alergice, îndepărtați imediat dispozitivul de fixare ortodontică.
- În timpul igienei orale, folosiți o periuță de dinți moale și periați ușor.

Trebuie să raportați producătorului și autorității competente din statul membru în care vă aflați orice incident grav care apare în legătură cu dispozitivul medical pe care îl furnizați.

Controindicații


- Aceste produse nu trebuie utilizate la pacienții alergici la latex.
- Încetați utilizarea produsului dacă apare o reacție alergică.
- Reutilizarea nu este permisă, caz în care poate apărea contaminarea încrucișată.
- Nu utilizați după data de expirare.

Păstrare

- A se păstra la temperatura camerei.

- A se păstra corespunzător în ambalajul propriu.
- Protejați de lumina soarelui sau de lumina directă.
- A nu se dispersa în mediu.

Simboluri

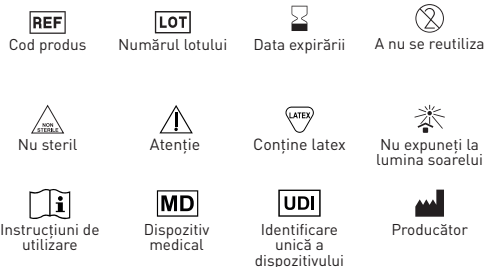

Garanție

Dental World va înlocui produsul în cazul în care acesta se dovedește a fi defect.

Dental World nu își asumă răspunderea pentru orice daune sau pierderi, directe sau indirecte, care rezultă din utilizarea neglijentă sau din incapacitatea de a utiliza produsul descris. Înainte de utilizare, este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat pentru utilizarea sa. Utilizatorul își asumă răspunderea pentru utilizarea neglijentă.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

sv - Eclipse

Intraorala latexelastiker

Beskrivning

Latexelastik används inom ortodonti för att korrigera olika typer av malokklusioner.

Indikationer

Intraoral elastik är avsedd för ortodontisk behandling av patienter i alla åldrar efter förskrivning av en ortodontist.

Rekommenderad procedur

1. Välj rätt storlek på latexgummiband enligt den ortodontiska metod som används.
2. Använd en ortodontisk pincett för att applicera gummibandet på den berörda tanden.
3. Hur länge gummibandet ska användas avgörs av ortodontisten.

Varningar

- Produkten ska användas av kvalificerade professionella ortodontister.
- Endast för tandläkarbruk.
- Produkten får inte återanvändas.
- Icke steril produkt.
- Instruera patienterna att inte tugga eller bita på hårda ämnen som hårda godisbitar, is, morötter etc.
- Vid en allergisk reaktion, ta omedelbart bort ortodontisk hållare.
- Vid munhygien, använd en mjuk tandborste och borsta försiktigt.

Du måste rapportera alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med den medicintekniska produkt som du ansvarar för till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där du befinner dig.

Kontraindikationer

- Dessa produkter ska inte användas av patienter som är allergiska mot latex.
- Avbryt användningen av produkten om en allergisk reaktion uppstår.
- Återanvändning är inte tillåten, i vilket fall korskontaminering kan förekomma.
- Använd inte efter utgångsdatum.

Förvaring

- Förvaras i rumstemperatur.
- Förvaras korrekt i sin egen förpackning.
- Skydda mot solljus eller direkt ljus.
- Får inte spridas i miljön.

Symboler



Produktkod



Partinummer



Utgångsdatum



Får inte återanvändas



Inte steril



Observera



Innehåller latex



Utsätts inte för solljus



Bruksanvisning



Medicinsk produkt



Unik identifiering av anordningen



Tillverkare

Garanti

Dental World ska ersätta produkten om den visar sig vara defekt.

Dental World tar inte ansvar för skador eller förluster, direkta eller indirekta, som beror på vårdslös användning eller oförmåga att använda den beskrivna produkten. Före användning är det användarens ansvar att avgöra om produkten är lämplig för sitt användningsområde. Användaren tar på sig ansvaret för vårdslös användning.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it