

IT - Eclipse - Elastomeri

Catenelle - Separatori - Legature

Descrizione

Gli elastomeri ortodontici, realizzati in poliuretano ad alta densità, sono utilizzati per applicare forze ai denti e sono impiegati in ortodonzia per correggere diversi tipi di malocclusioni.

Indicazioni d'uso

- I separatori elastici sono utilizzati per aprire gli spazi interprossimali tra i denti e sono ideali per creare spazi tra i molari per il posizionamento di bande ortodontiche.
- Le legature elastiche sono utilizzate per fissare l'arco al bracket e solitamente vengono cambiate ad ogni regolazione.
- Le catenelle elastiche sono in grado di esercitare forze leggere e continue per movimenti ottimali dei denti.

Procedura raccomandata

1. Selezionare la misura dell'elastomero (nel caso di: catenelle, legature e separatori).
2. Utilizzare una pinza ortodontica idonea per posizionare il dispositivo in uso.

Avvertenze

- Il prodotto deve essere utilizzato da ortodontisti professionisti qualificati.
- Solo per uso dentale.
- Non riutilizzare il prodotto.
- Prodotto non sterile.
- Istruire i pazienti a non masticare o mordere sostanze dure come caramelle dure, ghiaccio, carote, ecc.
- Durante l'igiene orale utilizzare uno spazzolino morbido e spazzolare delicatamente.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Controindicazioni

- Sospendere l'uso del prodotto in caso di reazione allergica.
- Non è consentito il riutilizzo, in tal caso po-

trebbero verificarsi contaminazioni crociate.

- Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente.
- Conservare correttamente nella propria confezione.
- Proteggere da raggi solari o luce diretta.
- Non disperdere nell'ambiente.

Simboli



Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'inabilità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

EN - Eclipse - Elastomers

Chains - Separators - Legatures

Description

Orthodontic elastomers, made of high-density polyurethane, are used to apply forces to teeth and are used in orthodontics to correct various types of malocclusions.

Indications for use

- Elastic separators are used to open interproximal spaces between teeth and are ideal for creating spaces between molars for placement of orthodontic bands.
- Elastic ligatures are used to secure the arch to the bracket and are usually changed at each adjustment.
- Elastic chains are capable of exerting light, continuous forces for optimal tooth movement.

Recommended procedure

- Select the elastomer size (in the case of: chains, ligatures and separators).
- Use a suitable orthodontic forceps to position the device in use.

Warnings

- The product should be used by qualified professional orthodontists.
- For dental use only.
- Do not reuse the product.
- Non sterile product.
- Instruct patients not to chew or bite hard substances such as hard candies, ice, carrots, etc.
- During oral hygiene, use a soft toothbrush and brush gently.

You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device you supply to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.

Contraindications


- Discontinue use of the product if an allergic reaction occurs.

- Reuse is not permitted, in which case cross-contamination may occur.
- Do not use after the expiration date.

Storage

- Store at room temperature.
- Store properly in their own packaging.
- Protect from sunlight or direct light.
- Do not disperse in the environment.

Symbols

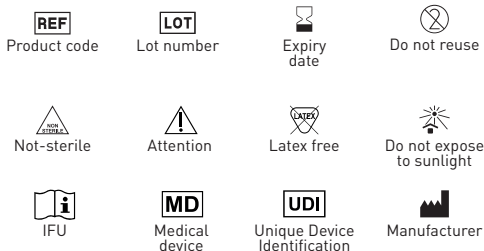

Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

FR - Eclipse - Élastomères

Chaînes - Séparateurs - Ligatures

Description

Les élastomères orthodontiques, en polyuréthane de haute densité, servent à appliquer des forces sur les dents et sont utilisés en orthodontie pour corriger divers types de malocclusions.

Indications d'utilisation

- Les séparateurs élastiques sont utilisés pour ouvrir les espaces interproximaux entre les dents et sont idéaux pour créer des espaces entre les molaires pour la mise en place de bagues orthodontiques.
- Les ligatures élastiques sont utilisées pour fixer l'arc au bracket et sont généralement changées à chaque ajustement.
- Les ligatures élastiques sont capables d'exercer des forces légères et continues pour un mouvement optimal des dents.

Procédure recommandée

1. Sélectionner la taille de l'élastomère (dans le cas des chaînes, ligatures et séparateurs).
2. Utiliser une pince orthodontique appropriée pour positionner le dispositif en cours d'utilisation.

Avertissements

- Le produit doit être utilisé par des orthodontistes professionnels qualifiés.
- Réservé à un usage dentaire.
- Ne pas réutiliser le produit.
- Produit non stérile.
- Demander aux patients de ne pas mâcher ou mordre des substances dures telles que des bonbons durs, de la glace, des carottes, etc.
- Lors de l'hygiène bucco-dentaire, utilisez une brosse à dents souple et brossez-vous doucement.

Vous devez signaler au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre tout incident grave lié au dispositif médical que vous avez fourni.


Contre-indications

- Suspendre l'utilisation du produit en cas de réaction allergique.
- Ne pas réutiliser le produit, sous peine de contamination croisée.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.

Conservation

- Conserver à température ambiante.
- Conserver correctement dans l'emballage.
- Protéger de la lumière du soleil ou de la lumière directe.
- Ne pas disperser dans l'environnement.

Symboles

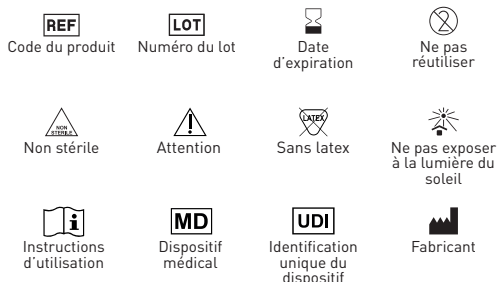

Garantie

Dental World remplacera le produit s'il s'avère défectueux.

Dental World n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou perte, direct ou consécutif, résultant de l'utilisation négligente ou de l'incapacité d'utiliser le produit décrit. Avant l'utilisation, il incombe à l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à son utilisation. L'utilisateur assume la responsabilité de l'utilisation négligente.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

ES - Eclipse - Elastómeros

Cadenas - Separadores - Ligaduras

Descripción

Los elastómeros ortodóncicos, fabricados en poliuretano de alta densidad, sirven para aplicar fuerzas sobre los dientes y se utilizan en ortodoncia para corregir diversos tipos de maloclusiones.

Indicaciones de uso

- Los separadores elásticos se utilizan para abrir espacios interproximales entre los dientes y son ideales para crear espacios entre los molares para la colocación de bandas ortodóncicas.
- Las ligaduras elásticas se utilizan para fijar el arco al bracket y suelen cambiarse en cada ajuste.
- Las ligaduras elásticas son capaces de ejercer fuerzas ligeras y continuas para un movimiento dental óptimo.

Procedimiento recomendado

1. Seleccionar el tamaño del elastómero (en el caso de: cadenas, ligaduras y separadores).
2. Utilizar una pinza de ortodoncia adecuada para colocar el aparato en uso.

Advertencias

- El producto debe ser utilizado por ortodoncistas profesionales cualificados.
- Sólo para uso dental.
- No reutilizar el producto.
- Producto no estéril.
- Instruir a los pacientes para que no mastiquen ni muerdan sustancias duras como caramelos duros, hielo, zanahorias, etc.
- Durante la higiene bucal utilice un cepillo de dientes suave y cepille con suavidad.

Debe informar al fabricante y a la autoridad competente de su Estado miembro de cualquier incidente grave que se produzca en relación con el producto sanitario que ha suministrado.

Contraindicaciones

- Suspender el uso del producto en caso de reacción alérgica.
- No reutilizar, en cuyo caso puede producirse contaminación cruzada.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.

Almacenamiento

- Conservar a temperatura ambiente.
- Conservar correctamente en el envase.
- Proteger de la luz solar o directa.
- No dispersar en el ambiente.

Símbolos



Garantía

Dental World sustituirá el producto si resulta defectuoso. Dental World no se hace responsable de los daños o pérdidas, directos o indirectos, resultantes de un uso descuidado o de la incapacidad de utilizar el producto descrito. Antes de su uso, es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su uso. El usuario asume la responsabilidad por el uso descuidado.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

ВG - Eclipse - Еластomers

вериги - сепаратори - крачета

Описание

Ортодонтските еластomers, изработени от полиуретан с висока плътност, се използват за прилагане на сили върху зъбите и се използват в ортодонтията за коригиране на различни видове неправилни изкривявания.

Показания за употреба

- Еластичните сепаратори се използват за отваряне на интерпроксимални пространства между зъбите и са идеални за създаване на пространства между моларите за поставяне на ортодонтички ленти.
- Еластичните лигатури се използват за закрепване на дъгата към брекета и обикновено се сменят при всяка корекция.
- Еластичните вериги са способни да упражняват леки, непрекъснати сили за оптимално движение на зъбите.

Препоръчителна процедура

1. Изберете размера на еластомера (при: верижки, лигатури и разделители).
2. Използвайте подходяща ортодонтичка щипка, за да позиционирате устройството при употреба.

Предупреждения

- Продуктът трябва да се използва от квалифицирани професионални ортодонти.
- Само за стоматологична употреба.
- Не използвайте продукта повторно.
- Нестерилен продукт.
- Инструктирайте пациентите да не дъвчат или хапят твърди вещества, като твърди бонбони, лед, моркови и др.
- По време на хигиената на устната кухина използвайте мека четка за зъби и я почиствайте внимателно.

Трябва да съобщавате за всички сериозни инциденти, възникнали във връзка с медицинското изделие, което доставяте, на производителя и на компетентния орган на държавата-членка, в която се намирате.

Контраиндикации

- Преустановете употребата на продукта, ако се появи алергична реакция.

- Повторната употреба не е разрешена, тъй като в този случай може да възникне кръстосано замърсяване.
- Не използвайте след изтичане на срока на годност.

Съхранение

- Съхранявайте при стайна температура.
- Съхранявайте правилно в собствената си опаковка.
- Защитете от слънчева или пряка светлина.
- Да не се разпръсква в околната среда.

Символи



Гаранция

Dental World заменя продукта, ако се окаже, че той е дефектен.

Dental World не поема отговорност за каквито и да било преки или последващи щети или загуби, произтичащи от небрежна употреба или невъзможност за използване на описания продукт. Преди употреба потребителят носи отговорност за това, че да определи доколко продуктът е подходящ за неговата употреба. Потребителят поема отговорност за използването на небрежна употреба.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

HR - Eclipse - Elastomeri

Lanci - Separatori - Legature

Opis

Ortodontski elastomeri, izrađeni od poliuretana visoke gustoće, koriste se za primjenu sila na zube i koriste se u ortodontiji za ispravljanje različitih vrsta malokluzija.

Indikacije za uporabu

- Elastični separatori koriste se za otvaranje interproksimalnih prostora između zuba i idealni su za stvaranje prostora između kutnjaka za postavljanje ortodontskih traka.
- Elastične ligature koriste se za pričvršćivanje luka na bravicu i obično se mijenjaju pri svakom podešavanju.
- Elastični lanci mogu primjenjivati lagane, kontinuirane sile za optimalno pomicanje zuba.

Preporučeni postupak

- Odaberite veličinu elastomera (u slučaju: lanka, ligatura i separatora).
- Upotrijebite odgovarajuću ortodontsku pincetu za pozicioniranje uređaja u upotrebi.

Upozorenja

- Proizvod smiju koristiti kvalificirani profesionalni ortodonti.
- Samo za stomatološku upotrebu.
- Ne koristite proizvod ponovno.
- Nesterilni proizvod.
- Pacijentima savjetujte da ne žvaču ili grizu tvari poput tvrdih bombona, leda, mrkve itd.
- Tijekom oralne higijene koristite meku četkicu za zube i nježno perite zube.

Sve ozbiljne incidente koji se dogode u vezi s medicinskim proizvodom koji isporučujete morate prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazite.

Kontraindikacije

- Prekinite s upotrebom proizvoda ako se pojavi alergijska reakcija.
- Ponovna upotreba nije dopuštena, u kojem

slučaju može doći do unakrsne kontaminacije.

- Ne koristiti nakon isteka roka valjanosti.

Skladištenje

- Čuvati na sobnoj temperaturi.
- Pravilno čuvati u vlastitom pakiranju.
- Zaštititi od sunčeve svjetlosti ili izravne svjetlosti.
- Ne raspršivati u okolišu.

Simboli

 Šifra proizvoda	 Broj lota	 Datum isteka roka trajanja	 Nemojte ponovno koristiti
 Nije sterilan	 Pažnja	 Bez lateksa	 Ne izlagati sunčevoj svjetlosti
 Upute za korištenje	 Medicinski uređaj	 Jedinstvena identifikacija uređaja	 Proizvođač

Jamstvo

Dental World će zamijeniti proizvod koji se pokaže neispravnim.

Dental World ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravni ili posljedični koji proizlaze iz nemara ili nemogućnosti korištenja opisanog proizvoda. Korisnik je prije uporabe odgovoran utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu ili njezinu uporabu. Korisnik preuzima odgovornost za nepažljivo korištenje.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

cs - Eclipse - Elastomery

Řetězy - Separátory - Legatury

Popis

Ortodontické elastomery vyrobené z polyuretanu s vysokou hustotou se používají k působení sil na zuby a v ortodoncii se používají ke korekci různých typů vad skusu.

Indikace k použití

- Elastické separátory se používají k otevření interproximálních prostor mezi zuby a jsou ideální k vytvoření prostor mezi stoličkami pro umístění ortodontických pásek.
- Elastické ligatury se používají k upevnění oblouku k rovnátkům a obvykle se mění při každé úpravě.
- Elastické řetízky jsou schopny vyvíjet lehké, kontinuální síly pro optimální pohyb zubů.

Doporučený postup

- Vyberte velikost elastomeru (v případě: řetízků, ligatur a separátorů).
- K umístění používaného zařízení použijte vhodné ortodontické kleště.

Varování

- Výrobek by měli používat kvalifikovaní profesionální ortodontisté.
- Pouze pro stomatologické použití.
- Výrobek nepoužívejte opakovaně.
- Nesterilní výrobek.
- Poučte pacienty, aby nežvýkali a nekousali tvrdé látky, jako jsou tvrdé bonbony, led, mrkev atd.
- Při ústní hygieně používejte měkký zubní kartáček a čistěte zuby jemně.

Veškeré závažné události, ke kterým dojde v souvislosti s vámi dodávaným zdravotnickým prostředkem, musíte hlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se nacházíte.

Kontraindikace

- Přerušete používání výrobku, pokud se objeví alergická reakce.

- Opakované použití není povoleno, v takovém případě může dojít ke křížové kontaminaci.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Skladování

- Uchovávejte při pokojové teplotě.
- Uchovávejte řádně ve vlastním obalu.
- Chraňte před slunečním zářením nebo přímým světlem.
- Nerozptylujte v životním prostředí.

Symbody



Záruka

Společnost Dental World vymění výrobek, pokud se ukáže, že je vadný.

Společnost Dental World nepřebírá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vzniklé v důsledku neopatrného používání nebo nemožnosti používat popsany výrobek. Před použitím je povinností uživatele zjistit vhodnost výrobku pro jeho použití. Uživatel přebírá odpovědnost za neopatrné použití.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

DA - Eclipse - Elastomerer

Kæder - Skillevægge – Fodstykker

Beskrivelse

Ortodontiske elastomerer, fremstillet af polyuretan med høj densitet, bruges til at påføre tænder kræfter og anvendes inden for ortodonti til at korrigere forskellige typer af malokklusioner.

Anvendelsesområder

- Elastiske separatore brugeres til at åbne interproximale mellemrum mellem tænderne og er ideelle til at skabe mellemrum mellem kindtænder til placering af ortodontiske bånd.
- Elastiske ligaturer bruges til at fastgøre buen til beslaget og skiftes normalt ved hver justering.
- Elastiske kæder er i stand til at udøve lette, kontinuerlige kræfter for optimal tandbevægelse.

Anbefalet procedure

- Vælg elastomerstørrelse (i tilfælde af: kæder, ligaturer og separatore).
- Brug en passende ortodontisk tang til at placere enheden i brug.

Advarsler

- Produktet bør anvendes af kvalificerede professionelle ortodontister.
- Kun til tandlægebrug.
- Produktet må ikke genbruges.
- Ikke-sterilt produkt.
- Instruer patienterne i ikke at tygge eller bide i hårde stoffer som f.eks. slik, is, gulerødder osv.
- Brug en blød tandbørste og børst forsigtigt under mundhygiejnen.

Du skal indberette alle alvorlige hændelser i forbindelse med det medicinske udstyr, du leverer, til fabrikanten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor du befinder dig.

Kontraindikationer

- Afbryd brugen af produktet, hvis der opstår en allergisk reaktion.
- Genbrug er ikke tilladt, da der i så fald kan fo-


rekomme krydskontaminering.

- Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Opbevaring

- Opbevares ved stuetemperatur.
- Opbevares korrekt i egen emballage.
- Beskyt mod sollys eller direkte lys.
- Må ikke spredes i miljøet.

Symboler

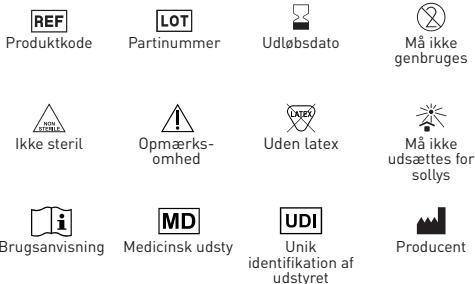

Garanti

Dental World erstatter produktet, hvis det viser sig at være defekt.

Dental World påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller følgeskader, som skyldes uforsigtig brug eller manglende evne til at bruge det beskrevne produkt. Før brug er det brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til den pågældende anvendelse. Brugeren påtager sig ansvaret for uforsigtig brug.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

NL - Eclipse - Elastomeren

Kettingen - Separatoren – Legaturen

Omschrijving

Orthodontische elastomeren, gemaakt van polyurethaan met een hoge dichtheid, worden gebruikt om krachten uit te oefenen op tanden en worden in de orthodontie gebruikt om verschillende soorten beetanomalie te corrigeren.

Gebruiksindicaties

- Elastische separatoren worden gebruikt om interproximale ruimten tussen tanden te openen en zijn ideaal voor het creëren van ruimten tussen kiezen voor het plaatsen van orthodontische banden.
- Elastische ligaturen worden gebruikt om de boog aan de beugel vast te maken en worden meestal bij elke aanpassing gewisseld.
- Elastische banden kunnen lichte, continue krachten uitoefenen voor een optimale beweging van de tanden.

Aanbevolen procedure

1. Selecteer de elastomeermaat (in het geval van: kettingen, ligaturen en separatoren).
2. Gebruik een geschikte orthodontische tang om het apparaat in gebruik te nemen.

Waarschuwingen

- Het product moet worden gebruikt door gekwalificeerde professionele orthodontisten.
- Alleen voor tandheelkundig gebruik.
- Het product niet opnieuw gebruiken.
- Niet steriel product.
- Instrueer patiënten niet te kauwen of te bijten op harde substanties zoals harde snoepjes, ijs, wortels, etc.
- Gebruik tijdens de mondhygiëne een zachte tandenborstel en poets voorzichtig.

U moet alle ernstige incidenten die zich voordoen in verband met het medische hulpmiddel dat u levert, melden aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin u zich bevindt.


Contro-indicaties

- Stop het gebruik van het product als een allergische reactie optreedt.
- Hergebruik is niet toegestaan, in dat geval kan kruisbesmetting optreden.
- Niet gebruiken na de vervaldatum.

Opslag

- Bewaren bij kamertemperatuur.
- Goed bewaren in de eigen verpakking.
- Bescherm tegen zonlicht of direct licht.
- Niet in de omgeving verspreiden.

Symbolen

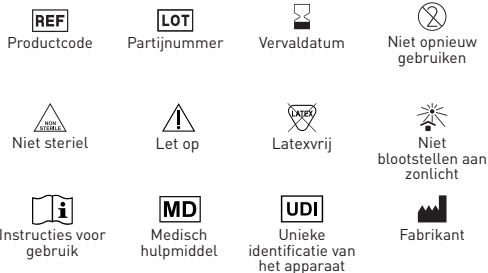

Garantie

Dental World vervangt het product als het defect blijkt te zijn.

Dental World aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van onzorgvuldig gebruik of het niet kunnen gebruiken van het beschreven product. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik vast te stellen of het product geschikt is voor zijn gebruik. De gebruiker is aansprakelijk voor onzorgvuldig gebruik.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

ET - Eclipse - Elastomeerid

Ketid - Separaatorid - Jalatsid

Kirjeldus

Ortodontilised elastomeerid, mis on valmistatud suure tihedusega polüuretaanist, kasutatakse hammastele jõudude avaldamiseks ja neid kasutatakse ortodontias mitmesuguste vääramingute korrigeerimiseks.

Kasutusnäidustused

- Elastilisi separaatoreid kasutatakse hammastevaheliste vahede avamiseks ja need on ideaalsed molaaride vaheliste vahede loomiseks ortodontiliste ribade paigaldamiseks.
- Elastseid ligatuure kasutatakse kaare kinnitamiseks sulguri külge ja neid vahetatakse tavaliselt iga korrigeerimise korral.
- Elastsed ahelad on võimelised avaldama kergeid, pidevaid jõude hammaste optimaalseks liikumiseks.

Soovitav protseduur

- Valige elastomeeri suurus (kettide, ligatuuride ja separaatorite puhul).
- Kasutage sobivat ortodontilist pintsetti, et seadet kasutamisel positsioneerida.

Hoiatused

- Toodet peaksid kasutama kvalifitseeritud professionaalsed ortodontid.
- Ainult hambaravis kasutamiseks.
- Ärge kasutage toodet uuesti.
- Mittesteriilne toode.
- Juhendada patsienti mitte närida või hammustada kõvasid aineid, nagu kõvad kommid, jää, porgandid jne.
- Kasutage suuhügieeni ajal pehmet hambaraha ja harjake õrnalt.

Te peate teatama kõigist teie poolt tarnitava meditsiiniseadmega seotud tõsistest vahejuhtumitest tootjale ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus te asute.

Vastunäidustused

- Allergilise reaktsiooni tekkimisel katkesta-

da toote kasutamine.

- Kasutamine ei ole lubatud, sellisel juhul võib tekkida ristsaastumine.
- Ei tohi kasutada pärast kõlblikkusaega.

Säilitamine

- Säilitada toatemperatuuril.
- Säilitada nõuetekohaselt oma pakendis.
- Kaitske päikesevalguse või otsese valguse eest.
- Mitte hajutada keskkonda.

Sümbolid

 Tootekood	 Partii number	 Aegumiskuupäev	 Mitte kordvkasutada
 Mitte-steriilsed	 Tähelepanu	 Lateksivaba	 Ei puutu kokku päikesevalgusega
 Kasutusjuhend	 Meditsiiniline seade	 Unikaalne seadme identifitseerimine	 Tootja

Garantii

Dental World vahetab toote välja, kui see osutub defektseks.

Dental World ei võta vastutust mis tahes otsese või kaudse kahju eest, mis tuleneb kirjeldatud toote hooletust kasutamisest või mittekasutamisest. Enne kasutamist peab kasutaja ise kindlaks tegema, kas toode on tema jaoks sobiv. Kasutaja võtab vastutuse hooletu kasutamise eest.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

DE - Eclipse - Elastomere

Ketten - Trennsteg - Legierungen

Beschreibung

Kieferorthopädische Elastomere aus hochdichtem Polyurethan werden verwendet, um Kräfte auf die Zähne auszuüben, und werden in der Kieferorthopädie zur Korrektur verschiedener Arten von Zahnfehlstellungen eingesetzt.

Anwendungsgebiete

- Elastische Separatoren werden zur Öffnung von Zahnzwischenräumen verwendet und eignen sich ideal zur Schaffung von Zwischenräumen zwischen den Backenzähnen für die Platzierung von kieferorthopädischen Bändern.
- Elastische Ligaturen werden verwendet, um den Bogen am Bracket zu befestigen, und werden in der Regel bei jeder Anpassung ausgetauscht.
- Elastische Ketten sind in der Lage, leichte, kontinuierliche Kräfte für eine optimale Zahnbewegung auszuüben.

Empfohlene Vorgehensweise

- Wählen Sie die Elastomergröße (bei Ketten, Ligaturen und Separatoren).
- Verwenden Sie eine geeignete kieferorthopädische Pinzette, um das Gerät zu positionieren.

Warnhinweise

- Das Produkt sollte nur von qualifizierten Kieferorthopäden verwendet werden.
- Nur für den zahnärztlichen Gebrauch.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Nicht steriles Produkt.
- Weisen Sie die Patienten an, keine harten Substanzen wie Bonbons, Eis, Karotten usw. zu kauen oder zu beißen.
- Bei der Mundhygiene eine weiche Zahnbürste verwenden und sanft putzen.

Sie müssen alle schwerwiegenden Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem von Ihnen gelieferten Medizinprodukt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie ansässig sind, melden.

Kontraindikationen


- Beim Auftreten einer allergischen Reaktion darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Eine Wiederverwendung ist nicht zulässig, da es zu Kreuzkontaminationen kommen kann.

- Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

Lagerung

- Bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Richtig in der Verpackung aufbewahren.
- Vor Sonnenlicht oder direktem Licht schützen.
- Nicht in der Umwelt verstreuen.

Symbole

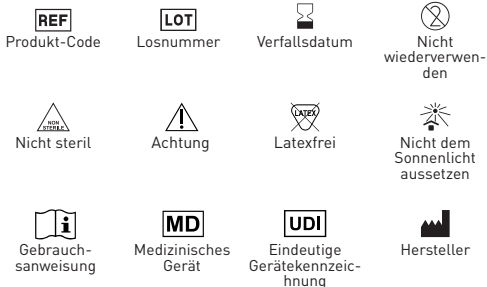

Garantie

Dental World tauscht das Produkt aus, wenn es sich als fehlerhaft erweist.

Dental World haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die sich ergeben aus oder der Unfähigkeit, das beschriebene Produkt zu verwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem Gebrauch die Eignung des Produkts für seine Verwendung festzustellen.

Der Benutzer übernimmt die Verantwortung für die unvorsichtige Verwendung.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

EL - Eclipse - Ελαστομερή

αλυσίδες - διαχωριστές - βάσεις

Περιγραφή

Τα ορθοδοντικά ελαστομερή, κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή δυνάμεων στα δόντια και χρησιμοποιούνται στην ορθοδοντική για τη διόρθωση διαφόρων τύπων δυσμορφιών.

Ενδείξεις χρήσης

- Τα ελαστικά διαχωριστικά χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα των μεσοδόντιων διαστημάτων μεταξύ των δοντιών και είναι ιδανικά για τη δημιουργία διαστημάτων μεταξύ των γομφίων για την τοποθέτηση ορθοδοντικών ταινιών.
- Οι ελαστικοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται για τη στερέωση του τόξου στον βραχίονα και συνήθως αλλάζουν σε κάθε προσαρμογή.
- Οι ελαστικές αλυσίδες είναι ικανές να ασκούν ελαφρές, συνεχείς δυνάμεις για τη βέλτιστη μετακίνηση των δοντιών.

Συνιστώμενη διαδικασία

1. Επιλέξτε το μέγεθος του ελαστομερούς (στην περίπτωση: αλυσίδων, ligatures και διαχωριστικών).
2. Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη ορθοδοντική λαβίδα για την τοποθέτηση της συσκευής κατά τη χρήση.

Προειδοποιήσεις

- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες ορθοδοντικούς.
- Μόνο για οδοντιατρική χρήση.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε το προϊόν.
- Μην αποστειρωμένο προϊόν.
- Δώστε οδηγίες στους ασθενείς να μην μασάνε ή δαγκώνουν σκληρές ουσίες, όπως σκληρές καραμέλες, πάγο, καρότα κ.λπ.
- Κατά τη διάρκεια της στοματικής υγιεινής, να χρησιμοποιείτε μαλακή οδοντόβουρτσα και να βουρτσίζετε απαλά.

Πρέπει να αναφέρετε κάθε σοβαρό περιστατικό που συμβαίνει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν που προμηθεύετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

Αντενδείξεις

- Διακόψτε τη χρήση του προϊόντος εάν

εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση.

- Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση, οπότε ενδέχεται να προκύψει διασταυρούμενη μόλυνση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης.

Αποθήκευση

- Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου.
- Φυλάσσετε σωστά στη δική τους συσκευασία.
- Προστατέψτε από το ηλιακό φως ή το άμεσο φως.
- Να μην διασκορπίζεται στο περιβάλλον.

Σύμβολα



Εγγύηση

Dental World αντικαθιστά το προϊόν εάν αποδειχθεί ελαττωματικό.

Dental World δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, άμεση ή επακόλουθη, που προκύπτει από.

απρόσεκτη χρήση ή αδυναμία χρήσης του περιγραφόμενου προϊόντος. Πριν από τη χρήση, είναι ευθύνη του χρήστη.

να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση απρόσεκτη χρήση.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

HU - Eclipse - Elastomerek

Láncok - Elválasztók - Lábak

Leírás

A nagy sűrűségű poliuretánból készült ortodontiai elastomerek a fogakra ható erők kifejtésére szolgálnak, és a fogszabályozásban a különböző típusú foghiányok korrigálására használják.

Használati javallatok

- Az elastikus szeparátorokat a fogak közötti interproximális terek megnyitására használják, és ideálisak a molárisok közötti terek létrehozására az ortodontikus szalagok elhelyezéséhez.
- A rugalmas ligatúrákat az ívnek a fogszabályzóhoz való rögzítésére használják, és általában minden egyes beállításkor cserélni kell őket.
- A rugalmas láncok könnyű, folyamatos erők kifejtésére képesek az optimális fogmozgás érdekében.

Ajánlott eljárás

- Válassza ki az elastomer méretét (láncok, ligatúrák és szeparátorok esetén).
- Használjon megfelelő fogszabályozó csipeszt a készülék használat közbeni pozicionálásához.

Figyelmeztetések

- A terméket csak szakképzett fogszabályozó szakemberek használhatják.
- Kizárólag fogászati felhasználásra.
- Ne használja fel újra a terméket.
- Nem steril termék.
- Utasítsa a beteget, hogy ne rágjon vagy harapjon kemény anyagokat, például kemény cukorkát, jeget, sárgarépat stb.
- A szájhygiénia során használjon puha fogkefét és óvatosan keféljen.

Az Ön által forgalmazott orvostechnikai eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos eseményeket jelentenie kell a gyártónak és a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Ellenjavallatok


- Allergiás reakció esetén hagyja abba a termék használatát.
- Az újrafelhasználás nem megengedett, ebben az esetben keresztszennyeződés fordulhat elő.

- Ne használja a lejáratí idő után.

Tárolás

- Szobahőmérsékleten tárolja.
- Tárolja megfelelően a saját csomagolásában.
- Védje a napfénytől vagy közvetlen fénytől.
- Ne szóródjon szét a környezetben.

Szimbólumok

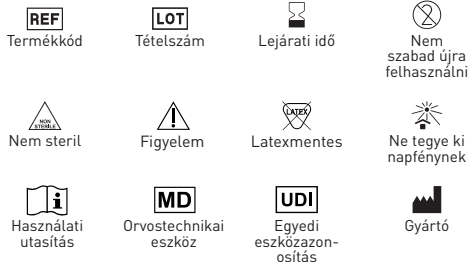

Garancia

A Dental World kicseréli a terméket, ha az hibásnak bizonyul.

A Dental World nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy veszteségért, amely a leírt termék gondatlan használatából vagy használhatatlanságából ered. Használat előtt a felhasználó felelőssége, hogy megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra. A gondatlan használatért a felhasználó vállalja a felelősséget.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

LV - Eclipse - Elastomēri

Ķēdes - Separatori – Legatūras

Apraksts

Ortodontiskie elastomēri, kas izgatavoti no augsta blīvuma poliuretāna, tiek izmantoti, lai pieliktu spēku zobiem, un tos izmanto ortodontijā, lai korrigētu dažāda veida kropslības.

Lietošanas indikācijas

- Elastīgos separatorus izmanto, lai atvērtu starpzobu starpsienas, un tie ir ideāli piemēroti, lai izveidotu atstarpes starp molāriem ortodontisko lenšu ievietošanai.
- Elastīgās ligatūras tiek izmantotas, lai nostiprinātu zobu loku pie kronšteina, un parasti tās tiek mainītas katras korekcijas laikā.
- Elastīgās ķēdes spēj radīt vieglus, nepārtauktus spēkus optimālai zobu kustībai.

Ieteicamā procedūra

- Izvēlieties elastomēra izmēru (ķēdītēm, līgatūrām un separatoriem).
- Izmantojiet piemērotas ortodontiskās knaiblītes, lai novietotu ierīci lietošanā.

Brīdinājumi

- Produkts jālieto kvalificētiem profesionāliem ortodontiem.
- Tikai lietošanai zobārstniecībā.
- Neizmantojiet izstrādājumu atkārtoti.
- Ne sterilis produkts.
- Norādiet pacientiem, ka nedrīkst košļāt vai kožot cietas vielas, piemēram, cietas konfektes, ledu, burkānus u. c.
- Veicot mutes dobuma higiēnu, izmantojiet mīkstu zobu birsti un tīriet maigi.

Jums jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodaties, par visiem nopietniem negadījumiem, kas saistīti ar jūsu piegādāto medicīnas ierīci.

Kontrindikācijas

- Pārtrauciet produkta lietošanu, ja rodas alerģiska reakcija.
- Atkārtota lietošana nav atļauta, jo tādā gadījumā var rasties savstarpēja kontaminācija.
- Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

Uzglabāšana

- Uzglabāt istabas temperatūrā.

- Pareizi uzglabāt savā iepakojumā.
- Aizsargājiet no saules gaismas vai tiešas gaismas.
- Neizplatīt vidē.

Simboli



Garantija

Dental World nomaina izstrādājumu, ja tas izrādās bojāts.

Dental World neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies aprakstītā izstrādājuma neuzmanīgas lietošanas vai nespējas to lietot dēļ. Pirms lietošanas lietotājs ir atbildīgs par to, lai noteiktu, vai izstrādājums ir piemērots tā lietošanai. Lietotājs uzņemas atbildību par neuzmanīgu lietošanu.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

LT - „Eclipse“ - Elastomerai

Grandinės - Separatoriai - Kojytės

Aprašymas

Ortodontiniai elastomerai, pagaminti iš didelio tankio poliuretano, naudojami dantų jėgoms veikti ir naudojami ortodontijoje, siekiant ištaisyti įvairių tipų sąkandžio ydas.

Naudojimo indikacijos

- Elastiniai separatoriai naudojami tarpdančiams tarp dantų atverti ir idealiai tinka tarpams tarp krūminių dantų sukurti, kad būtų galima uždėti ortodontines juostas.
- Elastinės ligatūros naudojamos lankui prie breketų pritvirtinti ir paprastai keičiamos kiekvieno reguliavimo metu.
- Elastinės grandinės gali sukelti nedideles, nuolatinės jėgos optimaliam dantų judėjimui.

Rekomenduojama procedūra

- Pasirinkite elastomero dydį (grandinėlių, ligatūrų ir separatorių atveju).
- Naudodami tinkamas ortodontines žnyplės nustatykite naudojimą prietaisą.

Įspėjimai

- Produktą turi naudoti kvalifikuoti profesionalūs ortodontai.
- Skirta naudoti tik odontologams.
- Nenaudokite gaminio pakartotinai.
- Nesterilus produktas.
- Nurodymas pacientams nekramtyti ir nekąsti kietų medžiagų, pavyzdžiui, kietų saldinių, ledo, morkų ir pan.
- Burnos higienos metu naudokite minkštą dantų šepetėlį ir valykite švelniai.

Apie visus rimtus incidentus, susijusius su jūsų tiekiamu medicinos prietaisu, privalote pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje esate, kompetentingai institucijai.

Kontroindikacijos

- Nutraukite gaminio naudojimą, jei pasireiškia alerginė reakcija.

- Pakartotinai naudoti negalima, nes tokiu atveju gali įvykti kryžminė tarša.
- Nenaudokite pasibaigus tinkamumo vartoti terminui.

Laikymas

- Laikyti kambario temperatūroje.
- Tinkamai laikyti savo pakuotėje.
- Saugokite nuo saulės spindulių ar tiesioginės šviesos.
- Neskleisti aplinkoje.

Simboliai



Garancija

A Dental World kicseréli a terméket, ha az hibásnak bizonyul.

A Dental World nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetlen kárért vagy veszteségért, amely a leírt termék gondatlan használatából vagy használatatlanságából ered. Használat előtt a felhasználó felelőssége, hogy megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra. A gondatlan használatért a felhasználó vállalja a felelősséget.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

PL - Eclipse - Elastomery

Łańcuchy - Separatory - Nogi

Opis

Elastomery ortodontyczne, wykonane z poliuretanu o wysokiej gęstości, służą do przykładania sił do zębów i są stosowane w ortodoncji do korygowania różnego rodzaju wad zgryzu.

Wskazania do stosowania

- Elastyczne separatory służą do otwierania przestrzeni międzyzębowych i są idealne do tworzenia przestrzeni między zębami trzonowymi w celu umieszczenia opasek ortodontycznych.
- Ligatury elastyczne służą do mocowania łuku do zamka i są zwykle zmieniane przy każdej regulacji.
- Elastyczne łańcuszki są w stanie wywierać lekkie, ciągłe siły dla optymalnego ruchu zębów.

Zalecana procedura

- Wybierz rozmiar elastomeru (w przypadku: łańcuszków, ligatur i separatorów).
- Użyj odpowiednich kleszczy ortodontycznych, aby umieścić urządzenie w użyciu.

Ostrzeżenia

- Produkt powinien być używany przez wykwalifikowanych ortodontów.
- Wyłącznie do użytku stomatologicznego.
- Nie używać produktu ponownie.
- Produkt niejadalny.
- Należy poinstruować pacjentów, aby nie żuili ani nie gryzli twardych substancji, takich jak twarde cukierki, lód, marchew itp.
- Podczas higieny jamy ustnej należy używać miękkiej szczoteczki do zębów i delikatnie szczotkować zęby.

Wszelkie poważne incydenty związane z dostarczanym wyrobem medycznym należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym się znajduje.

Przeciwwskazania


- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie produktu.

- Ponowne użycie jest niedozwolone, ponieważ może dojść do zanieczyszczenia krzyżowego.
- Nie używać po upływie daty ważności.

Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Przechowywać prawidłowo we własnym opakowaniu.
- Chronić przed światłem słonecznym lub bezpośrednim światłem.
- Nie rozpraszać w środowisku.

Symbole

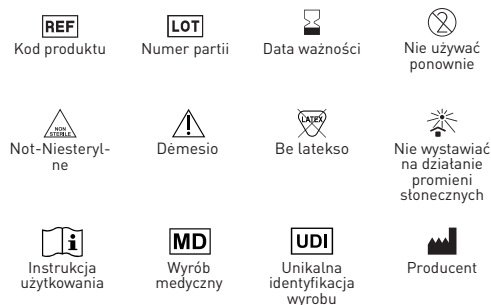

Gwarancja

Dental World wymieni produkt, jeśli okaże się on wadliwy.

Dental World nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty, bezpośrednie lub wtórne, wynikające z nieostrożnego użycia lub niemożności użycia opisanego produktu. Przed użyciem użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt jest odpowiedni do jego zastosowania. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za nieostrożne użytkowanie.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

PT - Eclipse - Elastómeros

Cadenas - Separadores - Ligaduras

Descrição

Os elastómeros ortodônticos, feitos de poliureta-no de alta densidade, são utilizados para aplicar forças nos dentes e são utilizados em ortodontia para corrigir vários tipos de más oclusões.

Indicações de utilização

- Os separadores elásticos são utilizados para abrir espaços interproximais entre os dentes e são ideais para criar espaços entre molares para a colocação de bandas ortodônticas.
- As ligaduras elásticas são utilizadas para fixar o arco ao bracket e são normalmente mudadas em cada ajuste.
- As ligaduras elásticas são capazes de exercer forças leves e contínuas para um movimento dentário ótimo.

Procedimento recomendado

- Selecionar o tamanho do elastômero (no caso de: correntes, ligaduras e separadores).
- Utilizar uma pinça ortodôntica adequada para posicionar o dispositivo a utilizar.

Avisos

- O produto deve ser utilizado por ortodontistas profissionais qualificados.
- Somente para uso dentário.
- Não reutilizar o produto.
- Produto não esterilizado.
- Instruir os pacientes para não mastigarem ou morderem substâncias duras, tais como re-buçados, gelo, cenouras, etc.
- Durante a higiene oral, utilizar uma escova de dentes macia e escovar suavemente.

Deve comunicar quaisquer incidentes graves rela-cionados com o dispositivo médico que forneceu ao fabricante e à autoridade competente do seu Esta-do-Membro.

Contra-indicações

- Suspender a utilização do produto em caso de

reação alérgica.

- Não é permitida a reutilização, caso em que pode ocorrer contaminação cruzada.
- Não utilizar após o prazo de validade.

Conservação

- Conservar à temperatura ambiente.
- Conservar corretamente na embalagem.
- Proteger da luz solar ou da luz direta.
- Não dispersar no ambiente.

Símbolos



Garantia

Dental World substituirá o produto se este se revelar defeituoso. Dental World não aceita responsabilidade por qualquer dano ou perda directa ou consequente resultante de utilização descuidada ou incapacidade de utilizar o produto descrito. Antes da utilização, é da responsabilidade do utilizador para determinar a adequação do produto à sua utilização. O utilizador assume a responsabilidade pela utilização uso descuidado.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Ro - Eclipse - Elastomeri

Lanțuri - Separatoare – Legături

Descriere

Elastomerii ortodontici, fabricați din poliuretan de înaltă densitate, sunt utilizați pentru a aplica forțe asupra dinților și sunt utilizați în ortodonție pentru a corecta diferite tipuri de malocluzii.

Indicații de utilizare

- Separatorii elastici sunt utilizați pentru a deschide spații interproximale între dinți și sunt ideali pentru a crea spații între molari pentru plasarea benzilor ortodontice.
- Ligaturile elastice sunt utilizate pentru a fixa arcada pe bracket și sunt de obicei schimbate la fiecare ajustare.
- Lanțurile elastice sunt capabile să exercite forțe ușoare și continue pentru mișcarea optimă a dinților.

Procedura recomandată

1. Selectați dimensiunea elastomerului (în cazul: lanțurilor, ligaturilor și separatoarelor).
2. Utilizați o pensă ortodontică adecvată pentru a poziționa dispozitivul în utilizare.

Avertismente

- Produsul trebuie utilizat de către ortodonți profesioniști calificați.
- Numai pentru uz dentar.
- Nu reutilizați produsul.
- Produs nesteril.
- Instruiți pacienții să nu mestecă sau să muște substanțe dure, cum ar fi bomboane tari, gheață, morcovi etc.
- În timpul igienei orale, utilizați o periuță de dinți moale și periați ușor.

Trebuie să raportați producătorului și autorității competente din statul membru în care vă aflați orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul medical pe care îl furnizați.

Contraindicații

- Încetați utilizarea produsului dacă apare o reacție alergică.
- Reutilizarea nu este permisă, caz în care poate apărea contaminarea încrucișată.

- Nu utilizați după data de expirare.

Păstrare

- A se păstra la temperatura camerei.
- A se păstra corespunzător în ambalajul propriu.
- Protejați de lumina soarelui sau de lumina directă.
- A nu se dispersa în mediu.

Simboluri



Cod produs



Numărul lotului



Data expirării



A nu se reutiliza



Nu steril



Atenție



Fără latex



Nu expuneți la lumina soarelui



Instrucțiuni de utilizare



Dispozitiv medical



Identificare unică a dispozitivului



Producător

Garanție

Dental World va înlocui produsul în cazul în care acesta se dovedește a fi defect.

Dental World nu își asumă răspunderea pentru orice daune sau pierderi, directe sau indirecte, care rezultă din utilizarea neglijentă sau din incapacitatea de a utiliza produsul descris. Înainte de utilizare, este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat pentru utilizarea sa. Utilizatorul își asumă răspunderea pentru utilizarea neglijentă.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

sv - Eclipse - Elastomerer

Kedjor - Separatorer - Legaturer

Beskrivning

Ortodontiska elastomerer, tillverkade av polyuretan med hög densitet, används för att applicera krafter på tänder och används inom ortodonti för att korrigera olika typer av malocclusioner.

Användningsområden

- Elastiska separatorer används för att öppna interproximala utrymmen mellan tänder och är idealiska för att skapa utrymmen mellan molarer för placering av ortodontiska band.
- Elastiska ligaturer används för att fästa bågen till bracket och byts vanligtvis vid varje justering.
- Elastiska kedjor kan utöva lätta, kontinuerliga krafter för optimal tandrörelse.

Rekommenderad procedur

- Välj storlek på elastomeren (för kedjor, ligaturer och separatorer).
- Använd en lämplig ortodontisk pincett för att positionera enheten vid användning.

Varningar

- Produkten ska användas av kvalificerade professionella ortodontister.
- Endast för tandläkarbruk.
- Produkten får inte återanvändas.
- Ikke steril produkt.
- Instruera patienterna att inte tugga eller bita i hårda ämnen som hårda karameller, is, morötter etc.
- Vid munhygien, använd en mjuk tandborste och borsta försiktigt.

Du måste rapportera alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med den medicintekniska produkt som du tillhandahåller till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där du är etablerad.

Kontroindikationer


- Avbryt användningen av produkten om en allergisk reaktion inträffar.

- Återanvändning är inte tillåten, då korskontaminering kan förekomma.
- Använd inte efter utgångsdatumet.

Förvaring

- Förvaras i rumstemperatur.
- Förvaras korrekt i sin egen förpackning.
- Skydda mot solljus eller direkt ljus.
- Får inte spridas i miljön.

Symboler

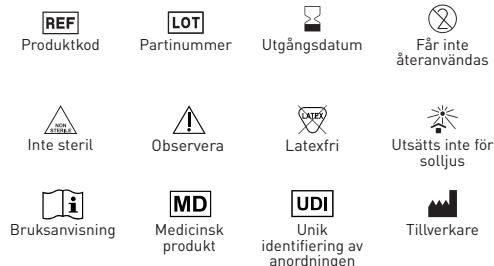

Garanti

Dental World ska ersätta produkten om den visar sig vara defekt.

Dental World tar inte ansvar för skador eller förluster, direkta eller indirekta, som beror på vårdslös användning eller oförmåga att använda den beskrivna produkten. Före användning är det användarens ansvar att avgöra om produkten är lämplig för sitt användningsområde. Användaren tar på sig ansvaret för vårdslös användning.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it