



## Attrezzatura / *Equipment*

---



## Easy Form Evolution

### Termoformatrice automatica / Automatic Thermoforming machine

La Evolution è una termoformatrice con processo di termoformatura completamente automatico.

Il processo viene assicurato mediante l'impostazione del tempo in funzione della tipologia del foglio utilizzato e del suo spessore.

*Evolution is an automatic thermoforming machine. The automatic process is assured by setting the time according to the type of sheet used and its thickness.*

#### Caratteristiche / Characteristics

- Display digitale  
*LCD display*
- Controllo a microprocessore SMD  
*SMD technology*
- Tempi impostabili (da 15" a 7')
- Resistenza 350 Watt  
*Resistance 350 watts*
- Pompa del vuoto integrata con pistone  
*Vacuum pump with piston included*
- Pressione massima 250 mbar  
*Maximum pressure 250 mbar*
- Rumorosità 56 dB  
*Noise level 56 dB*

#### Vantaggi / Advantages

- Processo di termoformatura completamente automatico  
*Fully automatic thermoforming process*
- Possibilità di utilizzo dischi quadrati o tondi da 120 a 125 mm  
*Possibility of using square or round sheets from 120 to 125 mm*
- Non necessita di aria compressa o fonti esterne di aria per aspirazione  
*Compressed air or external sources of suction air not required*

#### Packaging

- Termoformatrice: 1 pz  
*Thermoforming machine: 1 pcs*
- Cestello porta sfere: 1 pz  
*Spheres basket: 1 pcs*
- Cestello di dettaglio: 1 pz  
*Detail basket: 1 pcs*
- Cavo di alimentazione: 1 pz  
*Power cable: 1 pcs*
- Libretto istruzioni  
*Instruction for use*



Easy Form Evolution	00340720
Spheres Ø 0,40 mm - 1 bag	001040
Spheres Ø 0,28 mm - 1 bag	001041

■ Merce disponibile / Goods available  
■ Merce a richiesta / Goods on request

## Easy Form Aspy

### Termoformatrice manuale / Manual thermoforming machine

La Aspy è una termoformatrice manuale che consente all'operatore di gestire manualmente le fasi di termoformatura. L'operatore aziona la resistenza mediante l'apposito pulsante ed una volta riscaldato il foglio termoformabile in maniera appropriata, può procedere azionando la pompa del vuoto.

*Aspy is a manual thermoforming machine which allows the operator to manually manage the thermoforming steps. The operator activates the resistance by a specific button and, once the thermoforming sheet is appropriately heated, he can proceed by activating the vacuum pump.*

#### Caratteristiche / Characteristics

- Resistenza 350 Watt  
*Resistance 350 Watt*
- Pompa del vuoto integrata con pistone  
*Vacuum pump with piston included*
- Pressione massima 250 mbar  
*Maximum pressure 250 mbar*
- Rumorosità 56 dB  
*Noise level 56 dB*

#### Vantaggi / Advantages

- Possibilità di utilizzo di dischi quadrati o tondi da 120 a 125 mm  
*Possibility of using square or round sheets from 120 to 125mm*
- Non necessita di aria compressa o fonti esterne di aria per aspirazione  
*Compressed air or external sources of suction air not required*

#### Packaging

- Termoformatrice: 1 pz  
*Thermoforming machine : 1 pcs*
- Cestello porta sfere: 1 pz  
*Spheres basket: 1 pcs*
- Cestello di dettaglio: 1 pz  
*Detail basket: 1 pcs*
- Cavo di alimentazione: 1 pz  
*Power cable: 1 pcs*
- Libretto istruzioni  
*Instruction for use*



Easy Form Aspy	00340080
Spheres Ø 0,40 mm - 1 bag	001040
Spheres Ø 0,28 mm - 1 bag	001041

■ Merce disponibile / Goods available  
■ Merce a richiesta / Goods on request

## Puntatrice HL-WDII / Welder machine HL-WDII

La Puntatrice HL-WDII è un apparecchio estremamente versatile, grazie alle sue caratteristiche e alle sue dimensioni contenute. La HL-WDII può essere impiegata per PUNTATURA, BRASATURA, PUNTATURA A FREQUENZA, TRATTAMENTO TERMICO DI ACCIAI. Con il display digitale si evincono tutte le informazioni di impostazione e parametri. Dotata di 4 elettrodi superiori ed inferiori, ruotabili a 360° per avere tutte le combinazioni possibili per una corretta puntatura.

*A very versatile machine, thanks to its characteristics and dimensions. It can be used for welding, braze welding, frequency welding, stainless steel wire heat treatment. Endowed of 4 upper and lower 360° rotatable electrodes, to get all possible combinations for a correct welding.*




### Puntatrice

Welder machine	HL-WDII
1 pc / pack	

## Pentola a pressione / Pressure pot

Pentola a pressione per la polimerizzazione delle resine a freddo. Capienza 5 lt / Dimensione interna: altezza 14 cm - Ø 22 cm  
*Pressure pot used to cure cold resin. Capacity: 5lt / Internal dimension: height 14 cm - Ø 22 cm*

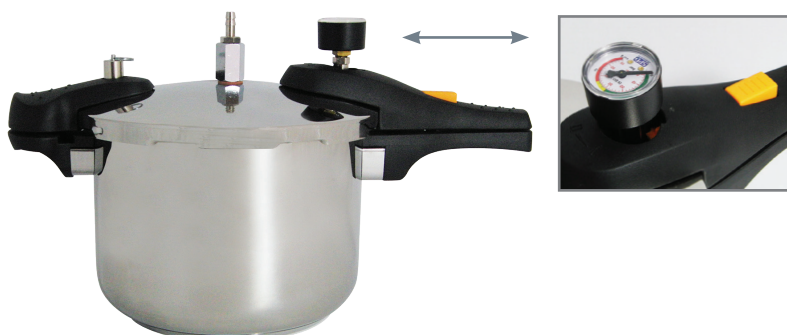


### Pentola a pressione

Pressure pot	160.000
1 pc / pack	

## Negativoscopio da tavolo LED / LED Negatoscope

Negativoscopio da tavolo a LED. Dimensioni: 432 mm x 304 mm x 102 mm. Indicato per cefalometrie e panoramiche.  
*LED Negatoscope. Size: 432 mm x 304 mm x 102 mm. Indicated for cephalometric and panoramic radiographs.*

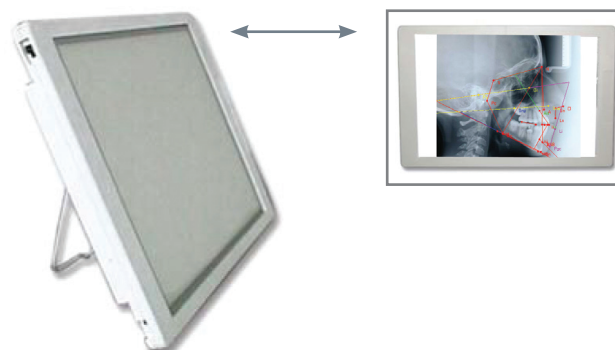

### Negativoscopio

Negatoscope	7080740
1 pc / pack	

■ Merce disponibile / Goods available  
 ■ Merce a richiesta / Goods on request